

KATALOGAS



**ЕКСПЕРТ**

ЛАБОРАТОРНІ МЕБЛІ



[labexpert.com.ua](http://labexpert.com.ua)





# Savos gamybos

TM "EXPERT" yra didžiausias laboratorinių baldų gamintojas Ukrainoje. Įmonė yra įsikūrusi Čerkasuose.

Gamyboje naudojama moderni technologinė metalo apdirbimo ir dažymo įranga .

# Patikimumas ir kokybė

TM "EXPERT" gaminiai gaminami serijomis ir atitinka DSTU GOST 16371:2016; DSTU GOST 19917:2016; DSTU GOST 22046:2004 reikalavimus. Kas tai patvirtina? Atitiktis sertifikatas ir valstybinė išvada, sanitarinė ir epidemiologinė apžiūra.

Kokybės vadybos sistema: laboratoriniai baldai sertifikuoti pagal tarptautinius ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 standartus.

Originalumo patvirtinimui naudojamas užrašas "EXPERT". prekė ir pasas su antspaudu.

# Garantijos ir aptarnavimas

Mūsų sėkmingos plėtros raktas yra visapusiškas klientų poreikių apie laboratorijos baldų apstatymą supratimas.

Valdome projektą ir prisiimame atsakomybę įgyvendinimui, pradedant nuo koncepcijos ir dizaino, gamyba ir baigiant baldų pristatymu bei montavimu kliento laboratorijoje.

Laboratorinių baldų garantinis laikotarpis yra 18 mėnesių. Taip pat siūlome pilną garantinių ir pogarantinių paslaugų paslaugą.

# Individualūs sprendimai

Lankstus, individualus požiūris į kiekvieną užsakymą leidžia mums sukurti laboratorijas, kurios maksimaliai patenkina klientų lūkesčius.

Mūsų produktų specialistai dirba su klientais, kurdami baldus, puikiai atitinkančius darbo vietą bei aplinką, ir išsprendžia visas patogumo, saugumo problemas.

Nestandartiniai sprendimai, gaminių modernizavimas padeda mūsų tikslams kurti naujus pokyčius, kurie atitiktų kliento poreikius.

Patikėkite savo laboratoriją ekspertams!

# KATALOGO TURINYS


|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| TRAUKOS SPINTOS                             |       |
| Visiškai metalinė traukos spinta            | 6     |
| Rūgštims atspari traukos spinta             | 8     |
| Speciali traukos spinta                     | 10    |
| Klasikinis gartraukis                       | 12    |
| Ištraukimo gaubtas-stalas                   | 14    |
| Spintelė mufelinėms krosnims                | 15    |
| Ant grindų statoma traukos spinta           | 16    |
| LABORATORINIAI STALAI                       |       |
| Laboratorinis stalas                        | 18    |
| Sustiprintas laboratorinis stalas           | 19    |
| Laboratorinis stalas - sala                 | 20    |
| Šoninis laboratorinis stalas                | 21    |
| Laboratorinis stalas su vienguba kriaukle   | 22    |
| Laboratorinis stalas su dviguba kriaukle    | 23    |
| Kampinis laboratorinis stalas               | 24    |
| Mobilus laboratorinis stalas                | 25    |
| Antivibracinis stalas                       | 26    |
| Antivibracinis stalas laboratoriniame stale | 27    |
| Aštuonkampis salos stalas                   | 28    |
| STALŲ PLĖTINIMAI                            |       |
| Stalo antstatas su lentynomis               | 30    |
| Stalo antstatas su spintele                 | 31    |
| Titravimo antstatas                         | 32    |
| Priedai kriauklės stalams                   | 33    |
| LABORATORINĖS STALŲ SPINTELĖS               |       |
| Pakabinamos stalų spintelės                 | 34    |
| Pakabinamos stalų spintelės su stalčiais    | 35    |
| Mobilios spintelės                          | 36    |
| LABORATORINĖS SPINTOS                       |       |
| Spinta reagentams                           | 38    |
| Spinta degiems reagentams                   | 39    |
| Spinta indams ir prietaisams                | 40    |
| Spinta drabužiams                           | 41    |
| Spinta inventoriui                          | 42    |
| Spinta dujų balionams                       | 43    |
| Laboratorijos lentynos                      | 44    |
| LABORATORIJOS BALDAI DARBUI                 | 46-47 |
| LABORATORIJOS KĖDĖS                         | 47    |





## DARBINIŲ PAVIRŠIŲ MEDŽIAGOS


Siūlome rinktis medžiagas laboratoriniams stalviršiams ir gartraukiams, priklausomai nuo laboratorijos paskirties. Reikėtų pažymėti, kad visi paviršiai reikalauja priežiūros. Rekomenduojame sumažinti stalviršio sąlyčio su reagentais laiką.

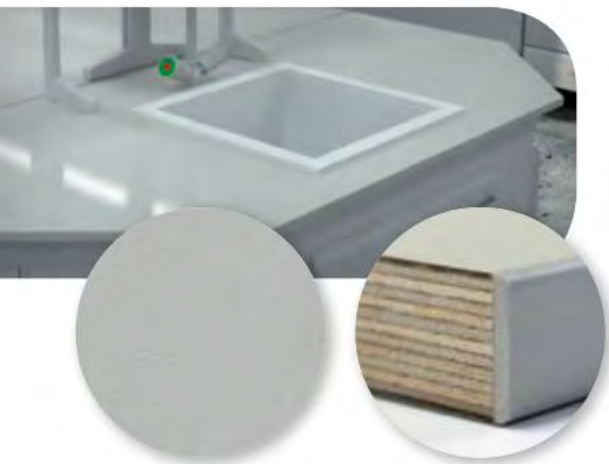

### AUKŠTO SLĖGIO LAMINATAS

Aukšto slėgio laminatas yra drėgmei atspari 16 mm storio fanera, padengta 0,9 mm storio HPL plastik su 2 mm storio PVC briauna.

Medžiaga atspari mechaniniam poveikiui. Atlaiko trumpalaikį koncentruotų cheminių medžiagų poveikį. Nerekomenduojama ilgai laikyti drėgnai ir aukštoje temperatūroje. Skirtas įrangos montavimui. Optimalus kainos ir kokybės santykis.

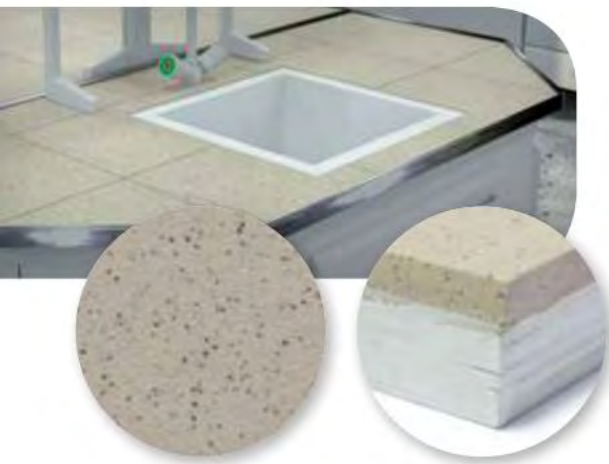

### PORCELININĖS GRANITINĖS PLYTELĖS 300

Jos pasižymi dideliu atsparumu cheminiams, terminiams ir mechaniniams poveikiams. Nekeičia struktūros, kai veikia dauguma rūgščių ir šarmų. Atsparumu chemikalams jis gerokai lenkia laminuotus paviršius ir nerūdijančio plieno dangas. Medžiaga atspari ilgalaikiam aukštų temperatūrų poveikiui. Nestabilios dinaminės apkrovoms.



Tai 300x300 mm matmenų porcelianinė plytelė, klijuota ant drėgmei atsparios 18 mm storio faneros. Siūlės sandarinamos dviejų komponentų, chemiškai atspariais klijais, pagamintais Italijoje. Paviršius matinis, pasižymintis neslystančiomis savybėmis. Stalviršį įrėmina 6 mm aukščio nerūdijančio plieno briauna.

Optimalus fizikinės ir cheminės laboratorijoms.

### Nerūdijantis PLIENAS AISI 304

Medžiaga tvirta, elastinga, be šiulių. Didelė fizinė ir šiluminė varža. Atsparus šarmams, tirpikliams, dažams, naftos produktams. Nerūdijantis plienas atsparus organinėms rūgštims, silpnoms mineralinėms rūgštims ir azoto rūgštims. Tačiau sieros ir druskos rūgštys pažeidžia plieną, taip pat nerekomenduojama dirbti su halogenais.


Jis puikiai valomas dezinfekavimo priemonėmis, kuriose nėra chloro. Tinka medicinos ir farmacijos laboratorijoms, biologijos ir mikrobiologijos laboratorijoms. Rekomenduojamas kelių tiesimo laboratorijoms, kuriose dažni mechaniniai veiksmai.

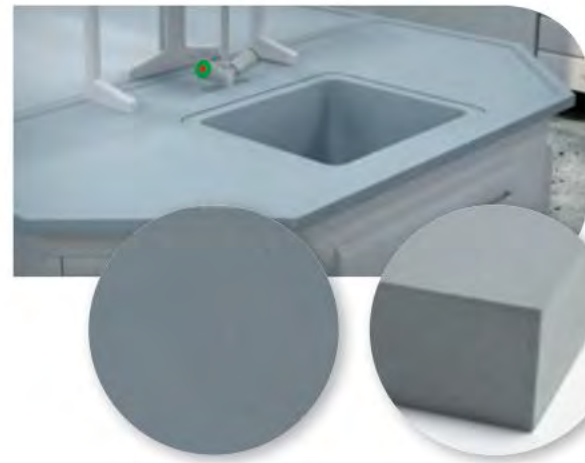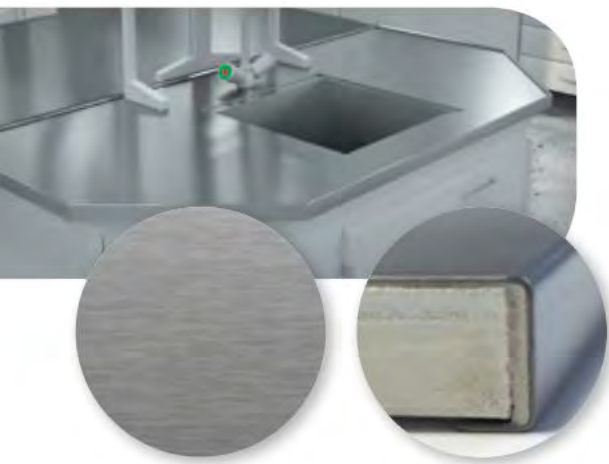

## DURCON POLIMERŲ KOMPOZITAS (JAV)

Monolitinė medžiaga epoksidinių dervų pagrindu su lygiu paviršiumi ir tankia struktūra. Chemiškai neutralus, atsparus rūgštims. Jis pasižymi dideliu stiprumu ir atsparumu daugumai cheminių medžiagų, naudojamų įvairių tipų laboratorijose. Dėl mažos drėgmės talpos ir poringumo trūkumo Durcon nepraleidžia ir nesugeria cheminių skysčių. Atsparus aukštai ir žemai temperatūrai. Išlaiko savaime gesinančios medžiagos savybes. Neatsparus šiluminiam šokui. Be to, ilgai veikiant koncentruotai agresyviai medžiagai, gali likti dėmių. Tačiau šią medžiagą galima šlifuoti ir poliruoti.

Durcon stalviršiai gali būti įrėminti iš tos pačios medžiagos pagaminta apvadų.

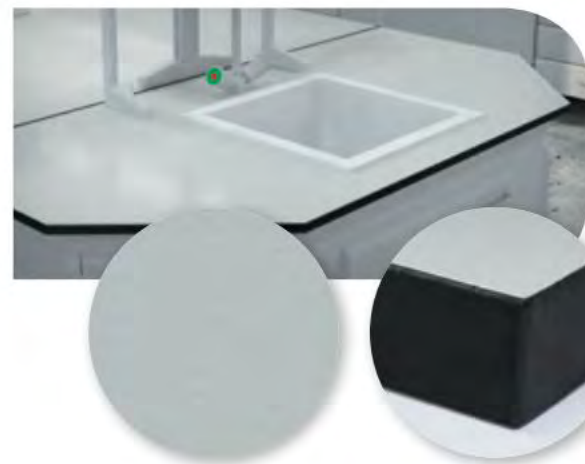


### HPL PLASTIKAS SPC DURCON

Laboratorinis HPL plastikinis SPC iš Durcon pasižymi dideliu cheminiu atsparumu ir atsparumu ilgalaikiam temperatūros poveikiui (iki 140°C) ir trumpalaikiam kaitinimui (iki 180°C). Veikiamas atviros liepsnos, jis minimaliai išskiria dūmus ir savaime užgesa. Antistatinis. Labai atsparus koncentruotoms rūgštims, paviršiaus nusidėvėjimui ir ultravioletiniams spinduliams. Jis turi matinį paviršių, lengvai prižiūrimas. Tinkamas sąlyčiui su maistu.

Puiki danga mikrobiologijos laboratorijų, chemijos ir fizikos laboratorijų baldams. Stalviršiai iš specialaus HPL plastiko pagal pageidavimą gali būti įrėminti polimero kompozito briauna.

Ilgalaikis mechaninis poveikis gali pažeisti viršutinį dangos sluoksnį.

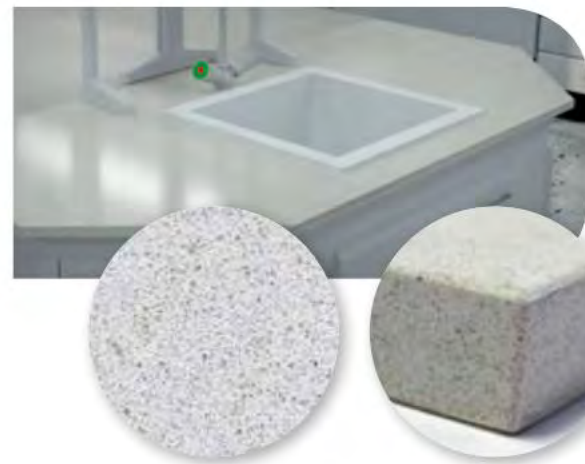

### DIRBTINIO KVARCO AKMENYS

Kompozicinė medžiaga, gauta derinant natūralų kvarcą (95%) ir poliesterio dervą (5%). Chemiškai inertiška, neturi porų ir mikrotrūkumų. Atsparus tiek žemai, tiek aukštai (iki 300 °C) temperatūrai. Kvarcinio akmens stalviršiai yra labai patvarūs, atsparūs drėgmei ir ilgaamžiai.

Vengti terminio šoko. Medžiaga nėra atspari vandenilio fluorida rūgščiai. Gana sunkus.

Danga naudojama garų gaubtuose ir laboratoriniuose staluose darbi vietose, kuriose yra didelė cheminių medžiagų koncentracija. Išbėgimas gali būti montuojamas iš polimero kompozito.



### PORCELININĖ GRANITINĖ PLOKŠTĖ 800

Didelio formato porcelianinė akmens masės plokštė 800x800 mm (ant 18 mm drėgmei atsparios faneros su 6 mm aukščio nerūdijančio plieno briauna) yra chemiškai atspari koncentruotoms rūgštims, šarmams ir tirpikliams. Atsparus ilgalaikiam aukštos ir žemos temperatūros poveikiui.

Medžiaga yra atspari dilimui, nehigroskopiška ir nedegi. Jos paviršius yra lygus, blizgus, o sujungiant plokštes praktiškai nematoma siūlė. Neatsparus dinaminėms apkrovoms ir vandenilio fluorida rūgščiai.

Tinka laboratorijoms, kuriose yra didelis cheminis ir mechaninis poveikis.



METALINĖ TRAUKOS  
SPINTA



Laboratorinė traukos spinta, skirta apsaugoti laboratorijoje esančius žmones ir pašalinti iš laboratorijos lakiuosius, dujinius produktus, susidariusius laboratorinių tyrimų ir cheminių reakcijų metu. Ji naudojamas darbui su įvairių rūgščių ir šarmų tirpalais.



SAVYBĖS:

- Viršutinė spintos dalis turi dvigubas sienes iš milteliniu būdu dengtos skardos
- Spintelės pagrindas – tvirtas metalinis karkasas iš 50x25x2 mm ir 25x25x2 mm vamzdžių. Spintos korpusas - lakštinis plienas (0,8 mm)
- Visos metalinės dalys nudažytos chemiškai atspariais epoksidiniais-poliesterio milteliniais dažais su tekstūra
- Pakeliamas apsauginis langas su apsauginiu stiklu „Triplex“ yra sujungtas su atsvarais, todėl jį galima tvirtinti reikiamame aukštyje (nuo 50 iki 800 mm)
- Aplekimo sistema, kuri sumažina oro srautą angoje, kai langas uždarytas
- Metalinės plokštės montuojamos išilgai darbo zonos, skirtos sukurti vienodus oro srautus
- Geresnis darbo zonos matomumas (angos priekyje įstiklinimas visu aukščiu)
- Viršutinėje spintos dalyje sumontuotas Ø250 mm vamzdis prijungimui prie centrinės ištraukimo sistemos
- 20W IP 65 LED šviesa ne darbo zonoje
- Stalviršis pagamintas iš chemiškai atsparios medžiagos (6 variantai)
- Apatinė spintos dalis yra vėdinama spintelė 2/3 skyrelių, kurių kiekvienas su dūrelėmis ir reguliuojama lentyna viduje
- Reguliuojamos atramos, skirtos kompensuoti nelygias grindis

KOMPLEKTACIJA:

- 4 euro lizdai (220 V, su uždaru korpusu IP 44)
- Diferencialinis jungiklis 16A
- Šviesos jungiklis ir ventiliatoriaus jungiklis (jei reikia)
- Elektros laidas (1500 mm ilgio) su euro kištuku
- 1/2 vėdinamos metalinės spintelės, skirtos reagentams laikyti
- Durų vyriai yra už sandėliavimo zonos ribų, paslėpti





PAPILDOMA ĮRANGA:

- Kanalizacija (pagaminta iš polipropileno arba polimero kompozito) – standartinis montavimas dešinėje
- Šalto vandens čiaupas su išoriniu reguliavimu FAR
- Vandentiekio ir nuotekų prijungimo priedai
- Ventiliatorius, kurio našumas 1080 m3 /val
- Ventiliuojama chemiškai atspari stiklo pluošto kapsulė skirta agresyvių medžiagų/reagentų saugojimui apatinėje kairėje spintelėje

GALIMAS MONTAVIMAS:

- Užraktas
- Dujų/oro čiaupai su variniais vamzdynais
- Oro srauto reguliatorius
- Oro srauto monitorius
- Elektrinis lango pakėlimas
- Kintamo greičio pavara ventiliatoriaus valdymui

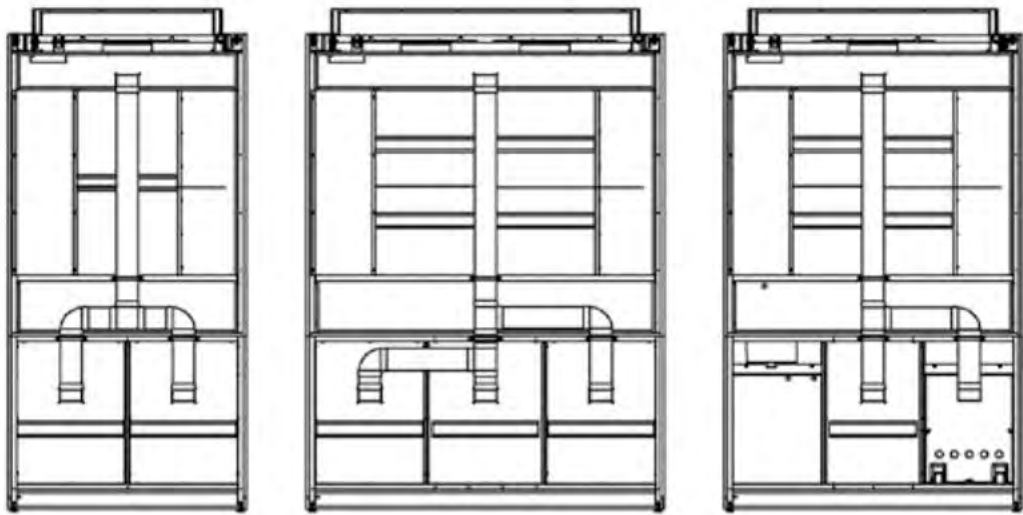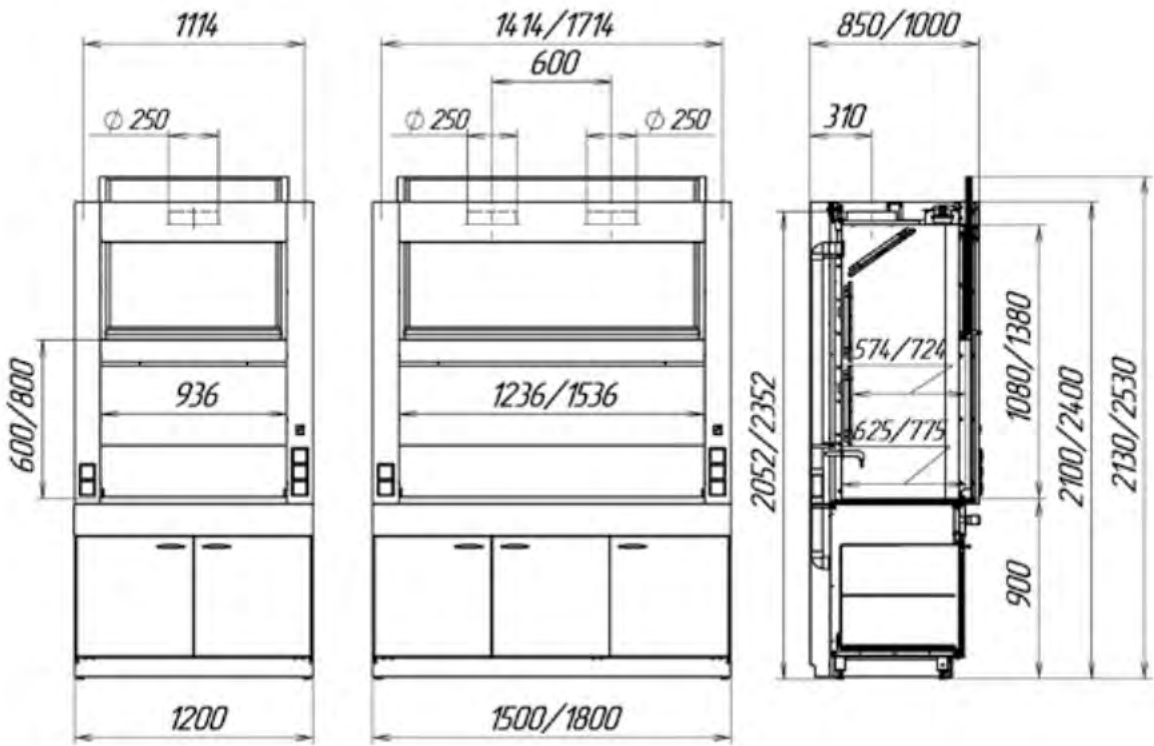

| Darbinis paviršius                 | Matmenys, mm           |             |                            | Papildoma įranga                                                                                                                                       |
|------------------------------------|------------------------|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | Ilgis                  | Gylis       | Aukštis                    |                                                                                                                                                        |
| Porceliano keramika 300x300        | 1200<br>1500<br>1800 m | 850<br>1000 | 2100 (2230)<br>2400 (2530) | Vandens tiekimas (čiaupas + kanalizacija)<br>Dujų tiekimas (čiaupas)<br>Spintelė su chemiškai atsparia kapsule reagentams<br>Pramoninis ventiliatorius |
| Nerūdijantis plienas               |                        |             |                            |                                                                                                                                                        |
| Durcon polimero kompozitas         |                        |             |                            |                                                                                                                                                        |
| Atsparus chemikalams HPL plastikas |                        |             |                            |                                                                                                                                                        |
| Dirbtinis kvarco akmuo             |                        |             |                            |                                                                                                                                                        |
| Porceliano keramika 800x800        |                        |             |                            |                                                                                                                                                        |

Laboratorinė traukos spinta, skirta pašalinti iš laboratorijos lakius, dujinius produktus, susidariusius laboratorinių tyrimų ir cheminių reakcijų metu. Naudojamas darbui su koncentruotomis rūgštimis ir šarmais aukštoje temperatūroje.



SAVYBĖS:

- Vidinė darbo zona – tvirtas stiklo pluoštas, atsparus agresyvioms medžiagoms ir aukštai temperatūrai
- Spintos pagrindas – tvirtas metalinis karkasas iš 50x25x2 mm ir 25x25x2 mm vamzdžių. Spintos korpusas - lakštinis plienas (0,8 mm) • Visos metalinės dalys nudažytos chemiškai atspariais epoksidiniais poliesterio milteliniais dažais su tekstūra
- Pakeliamas apsauginis langas su apsauginiu stiklu „Triplex“ yra prijungtas prie atsvarų, todėl jį galima tvirtinti reikiamame aukštyje (nuo 50 iki 650 mm)
- Spintos darbo zonoje sumontuotos stiklo pluošto plokštės, skirtos sukurti vienodus oro srautus
- Geresnis darbo zonos matomumas (angos priekyje įstiklinimas visu aukščiu)
- Viršutinėje spintos dalyje sumontuotas Ø250 mm stiklo pluošto vamzdis prijungimui prie išmetimo sistemos
- 20W IP 65 LED šviesa ne darbo zonoje
- Stalviršis pagamintas iš chemiškai atsparios medžiagos (6 variantai)
- Apatinė spintos dalis yra vėdinama spintelė, 2/3 skyrelių, kurių kiekvienas su dūrelėmis ir reguliuojama lentyna viduje • Reguliuojamos atramos, skirtos kompensuoti nelygias grindis

KOMPLEKTACIJA:

- 4 euro lizdai (220 V, su uždaru korpusu IP 44)
- Diferencialinis jungiklis 16A
- Šviesos jungiklis ir ventiliatoriaus jungiklis (jei yra)
- Elektros laidas (1500 mm ilgio) su euro kištuku
- 1/2 vėdinama metalinė spintelė, skirtos reagentams laikyti
- Durų vyriai yra už sandėliavimo zonos ribų, paslėpti



PAPILDOMA ĮRANGA:

- Kanalizacija (pagamintas iš polipropileno arba polimero kompozito) – standartinis montavimas dešinėje
- Šalto vandens čiaupas su išoriniu reguliavimu FAR
- Vandentiekio ir nuotekų prijungimo priedai
- Specialus sprogimui atsparus ventiliatorius
- Ventiliuojama chemiškai atspari stiklo pluošto kapsulė skirta agresyvių medžiagų/reagentų saugojimui apatinėje kairėje spintelėje



GALIMAS MONTAVIMAS:

- Užraktas
- Dujų/oro čiaupai su variniais vamzdžiais
- Oro srauto reguliatorius
- Oro srauto monitorius
- Elektrinis lango pakėlimas
- Kintamo greičio pavara ventiliatoriaus valdymui

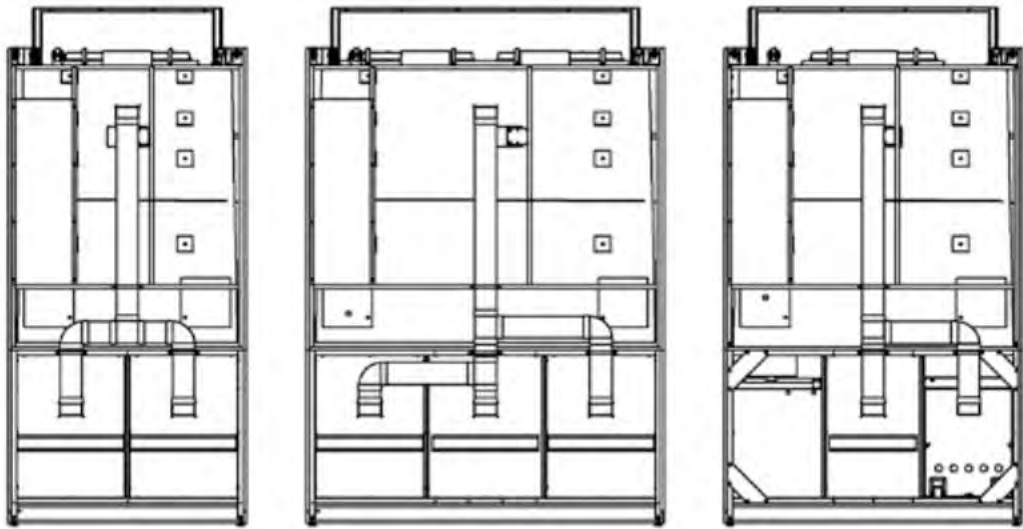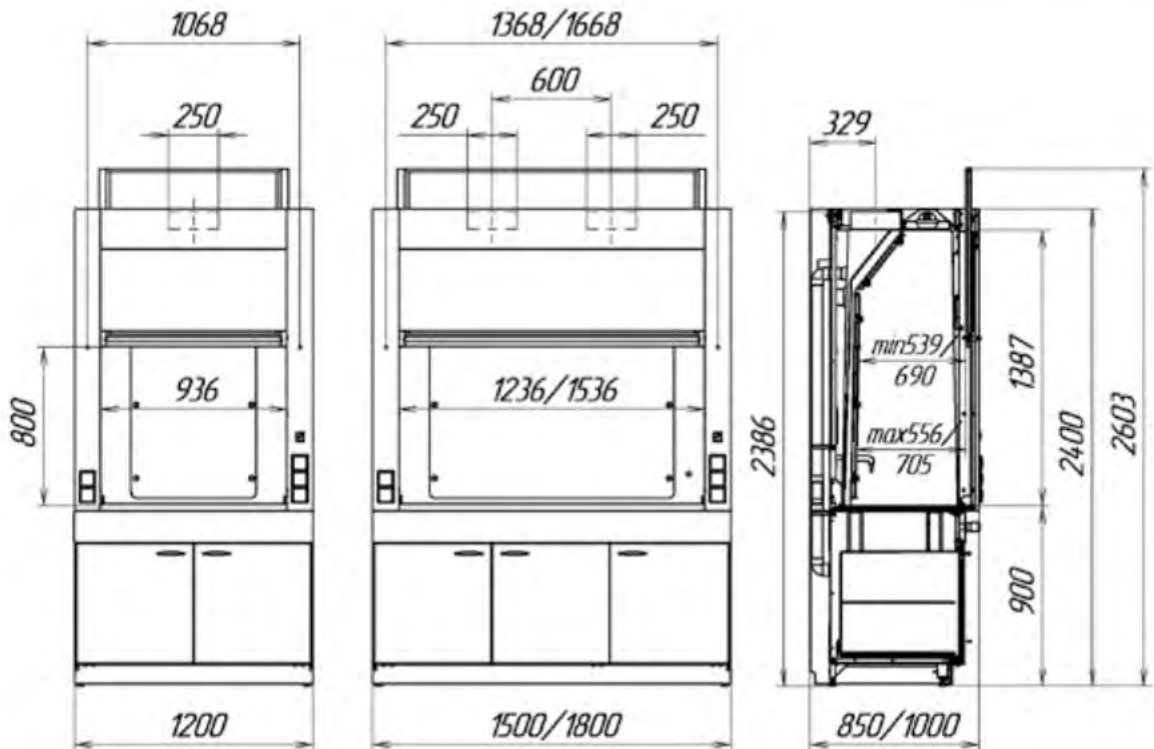

| Darbinis paviršius                                                                                                                                                               | Matmenys, mm           |             |             | Papildoma įranga                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                  | Ilgis                  | Gylis       | Aukštis     |                                                                                                                                                                |
| Porceliano keramika 300x300<br>Nerūdijantis plienas<br>Durcon polimero kompozitas<br>Atsparus chemikalams HPL plastikas<br>Dirbtinis kvarco akmuo<br>Porceliano keramika 800x800 | 1200<br>1500<br>1800 m | 850<br>1000 | 2400 (2530) | Vandens tiekimas (čiaupas + kanalizacija)<br>Dujų tiekimas (čiaupas)<br>Spintelė su chemiškai atsparia kapsule reagentams<br>Sprogimui atsparus ventiliatorius |



Laboratorinė traukos spinta, skirta apsaugoti darbuotojus ir pašalinti iš laboratorijos lakiuosius, dujinius produktus, susidariusius laboratorinių tyrimų ir cheminių reakcijų metu. Ji naudojamas dirbant su didelės koncentracijos įvairių rūgščių ir šarmų tirpalais.



SAVYBĖS:

- Vidinė darbo zona visiškai išklotą chemikalams atspariu 6 mm storio HPL plastikumu SPC Durcon.
- Spintos pagrindas – patvarus metalinis karkasas iš 50x25x2 mm ir 25x25x2 mm vamzdžių. Spintos korpusas – lakštinis plienas (0,8 mm)
- Visos metalinės dalys nudažytos chemiškai atspariais epoksidiniais-poliesterio milteliniais dažais su tekstūra
- Pakeliamas apsauginis langas su apsauginiu stiklu „Triplex“ yra sujungtas su atsvarais, kas leidžia tvirtinti reikiamame aukštyje (nuo 50 iki 800 mm)
- HPL plastikinės plokštės sumontuotos išilgai darbo zonos, skirtos sukurti vienodus oro srautus
- Aplenkimo sistema, kuri sumažina oro srautą angoje, kai langas uždarytas
- Didelis darbo zonos matomumas (angos įstiklinimas priekyje iki viso aukščio)
- Viršutinėje spintos dalyje sumontuotas Ø250 mm vamzdis išorėje, skirtas prijungti prie centrinės ištraukimo sistemos.
- IP6 galios lempos TW5
- Chemiškai atspari paviršiaus medžiaga (6 variantai)
- Apatinė spintos dalis yra ventiliuojama spintelė su 2/3 skyreliais, kurių kiekviename yra durys ir reguliuojama lentyna viduje
- Reguliuojamos atramos kompensuoti grindų nelygumus

KOMPLEKTACIJA:

- 4 Euro kištukiniai lizdai (220 V, su uždaru korpusu IP 44)
- 16A diferencialinis grandinės pertraukiklis
- Šviesos jungiklis ir ventiliatoriaus jungiklis (jei yra)
- Elektros laidas (1500 mm ilgio) su Euro kištuku
- 1/2 vėdinamos metalinės spintelės, skirtos reagentams laikyti
- Durų vyriai yra už sandėliavimo zonos ribų, paslėpti





PAPILDOMA ĮRANGA:

- Kanalizacija (pagamintas iš polipropileno arba polimero kompozito) – standartinis montavimas dešinėje.
- Šalto vandens čiaupas su išoriniu FAR reguliavimu
- Vandentiekio ir nuotekų prijungimo priedai
- Ventiliatorius, kurio našumas 1080 m3/h
- Ventiliuojama chemiškai atspari stiklo pluošto kapsulė agresyvių medžiagų/reagentų saugojimui apatinėje kairėje spintelėje


GALIMAS MONTAVIMAS:

- Užraktas
- Dujų/oro vožtuvai su variniu vamzdynu
- Oro srauto regulatorius
- Oro srauto monitorius
- Elektrinis lango vožtuvas
- Ventiliatoriaus valdymo variatorius

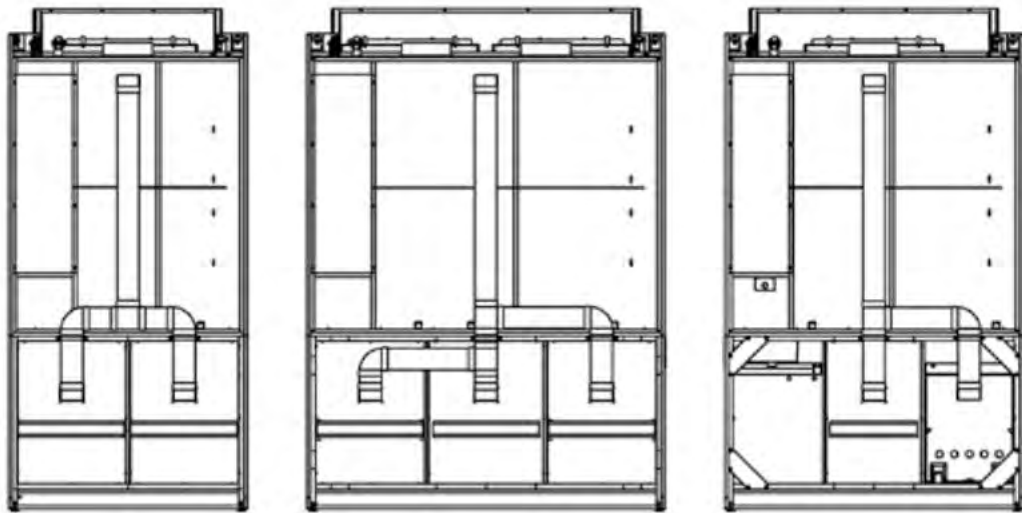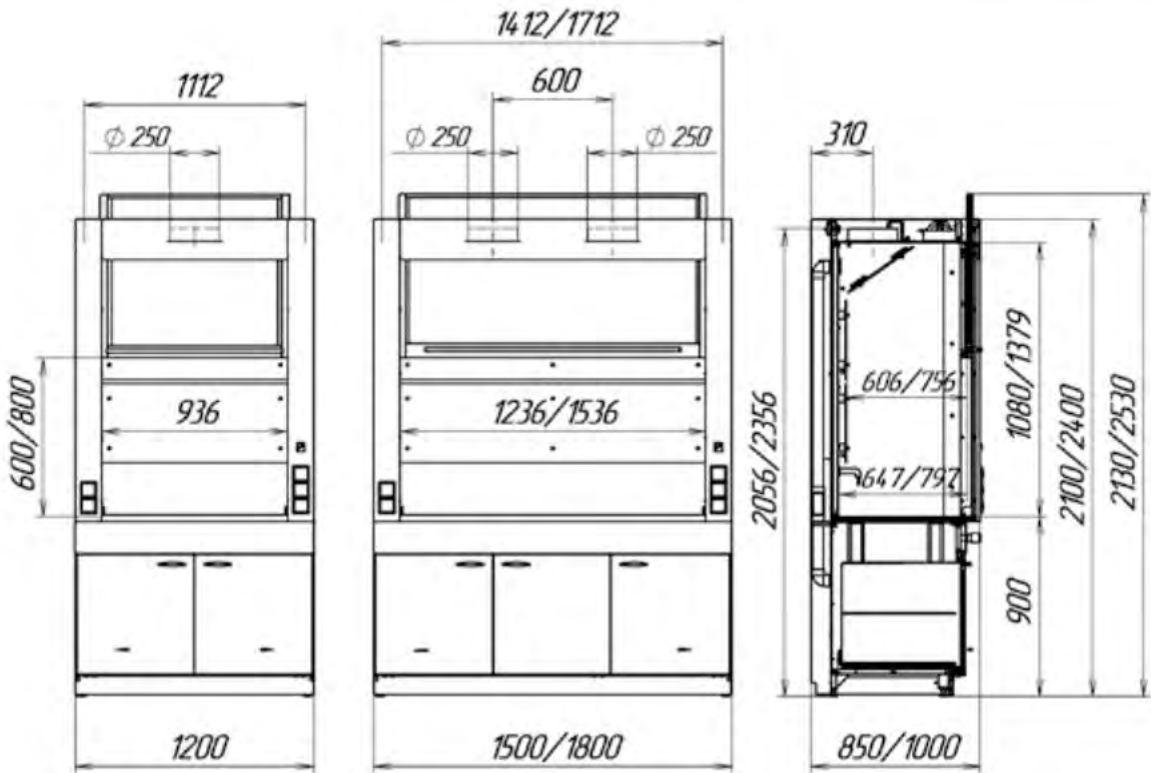

| Darbinis paviršius                                                                                                                                                                      | Matmenys, mm           |             |                            | Papildoma įranga                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                         | Ilgis                  | Gylis       | Aukštis                    |                                                                                                                                                        |
| Porceliano keramikos dirbiniai<br>300x300 Nerūdijantis plienas<br>Durcon polimerinis kompozitas<br>Chemiškai atsparus HPL plastikas<br>Dirbtinis kvarcinis akmuo<br>Porcelianas 800x800 | 1200<br>1500<br>1800 m | 850<br>1000 | 2100 (2230)<br>2400 (2530) | Vandens tiekimas (čiaupas + kanalizacija)<br>Dujų tiekimas (čiaupas)<br>Spintelė su chemiškai atsparia kapsule reagentams<br>Pramoninis ventiliatorius |

Laboratorinė traukos spinta, skirta apsaugoti laborantą ir pašalinti iš laboratorijos lakiuosius, dujinius produktus, susidariusius laboratorinių tyrimų ir cheminių reakcijų metu.

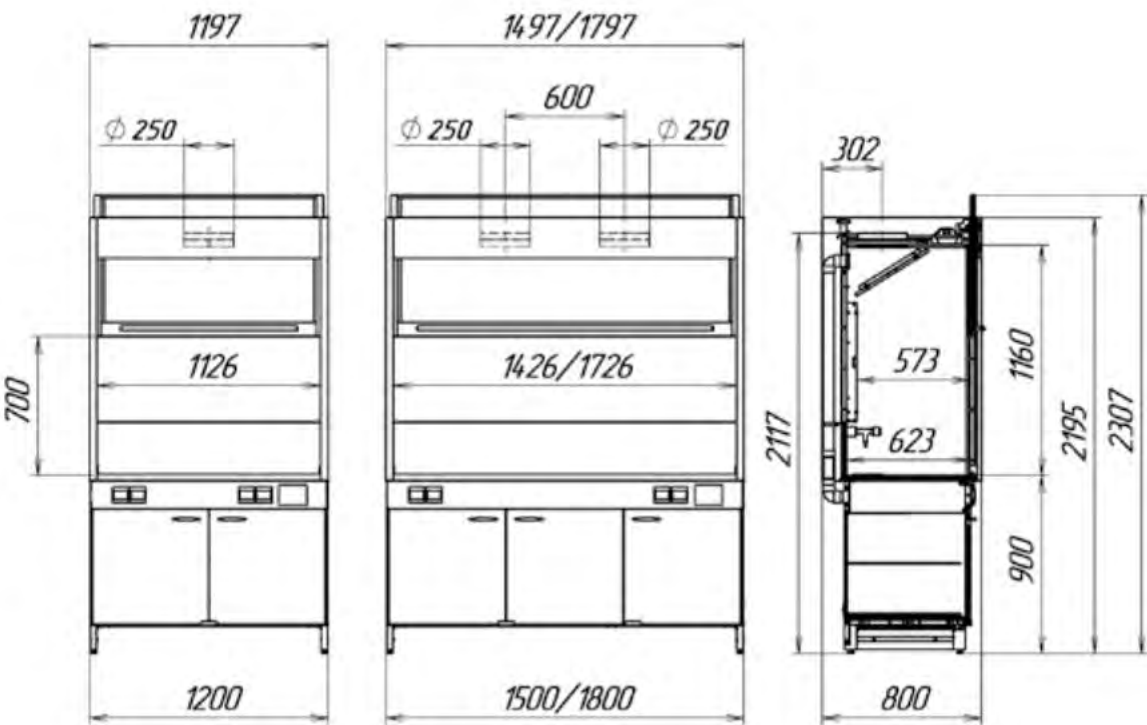

SAVYBĖS:

- Spintos pagrindas – tvirtas metalinis karkasas su miltelinu dažymu, kuris užtikrina konstrukcijos patikimumą
- Korpusas – lakštinis metalas su chemiškai atsparia milteline danga šviesiai pilkos spalvos
- Pakeliamas apsauginis langas su apsauginiu stiklu „Triplex“ yra sujungtas su atsvarais, todėl jį galima tvirtinti reikiame aukštyje (nuo 50 iki 700 mm)
- Metalinės plokštės montuojamos išilgai darbo zonos, skirtos sukurti vienodus oro srautus
- Geresnis darbo zonos matomumas (angos priekyje įstiklinimas visu aukščiu)
- Viršutinėje spintelės dalyje sumontuotas Ø250 mm vamzdis prijungimui prie centrinės ištraukimo sistemos
- 20W IP 65 LED šviesa ne darbo zonoje
- Stalviršis pagamintas iš chemiškai atsparios medžiagos (6 variantai)
- Apatinė spintos dalis yra vėdinama spintelė su 2/3 skyreliais, kurių kiekvienas su dūrelėmis ir reguliuojama lentyna viduje
- Reguliuojamos atramos, skirtos kompensuoti nelygias grindis


KOMPLEKTACIJA:

- 3 euro lizdai (220 V, su uždaru korpusu IP 44)
- Diferencialinis jungiklis 16A
- Šviesos jungiklis ir ventiliatoriaus jungiklis (jei yra)
- Elektros laidas (1500 mm ilgio) su euro kištuku
- 1/2 vėdinamų metalinių spintelių, skirtų nerūdijantiems reagentams laikyti
- Durų vyriai yra už sandėliavimo zonos ribų, paslėpti



PAPILDOMA ĮRANGA:

- Drenažas (iš polipropileno 150x150x150 mm) – standartiškai montuojamas dešinėje
- Šalto vandens čiaupas (montuojamas ant sienos)
- Vandentiekio ir nuotekų prijungimo priedai
- Ventiliatorius, kurio našumas 1080 m<sup>3</sup> /val
- Ventiliuojama chemiškai atspari stiklo pluošto kapsulė skirta agresyvių medžiagų/reagentų saugojimui apatinėje kairėje spintelėje

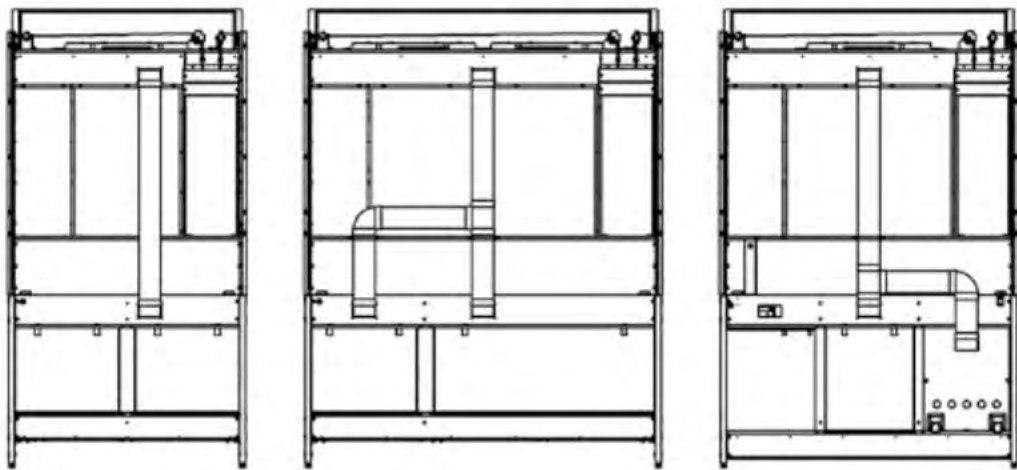


| Darbinis paviršius                                             | Matmenys, mm |       |         | Papildoma įranga                                  |
|----------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------|---------------------------------------------------|
|                                                                | Ilgis        | Gylis | Aukštis |                                                   |
| Porceliano keramika 300x300                                    |              |       |         |                                                   |
| Nerūdijantis plienas                                           | 1200         |       |         |                                                   |
| „Durcon“ polimerų kompozitas, chemiškai atsparus HPL plastikas | 1500         | 800   | 2200    | Vandens tiekimas (čiaupas + kanalizacija)         |
| Dirbtinis kvarco akmuo                                         | 1800 m       |       |         | Dujų tiekimas (čiaupas)                           |
| Porceliano keramika 800x800                                    |              |       |         | Spintelė su chemiškai atsparia kapsule reagentams |
|                                                                |              |       |         | Pramoninis ventiliatorius                         |



LABORATORINIS STALAS  
TRAUKOS SPINTA



Laboratorinis stalas - traukos spinta, skirta apsaugoti darbuotojus ir pašalinti iš laboratorijos lakiuosius, dujinius produktus, susidariusius laboratorinių tyrimų ir cheminių reakcijų metu. Naudojamas sėdinčiam darbui.

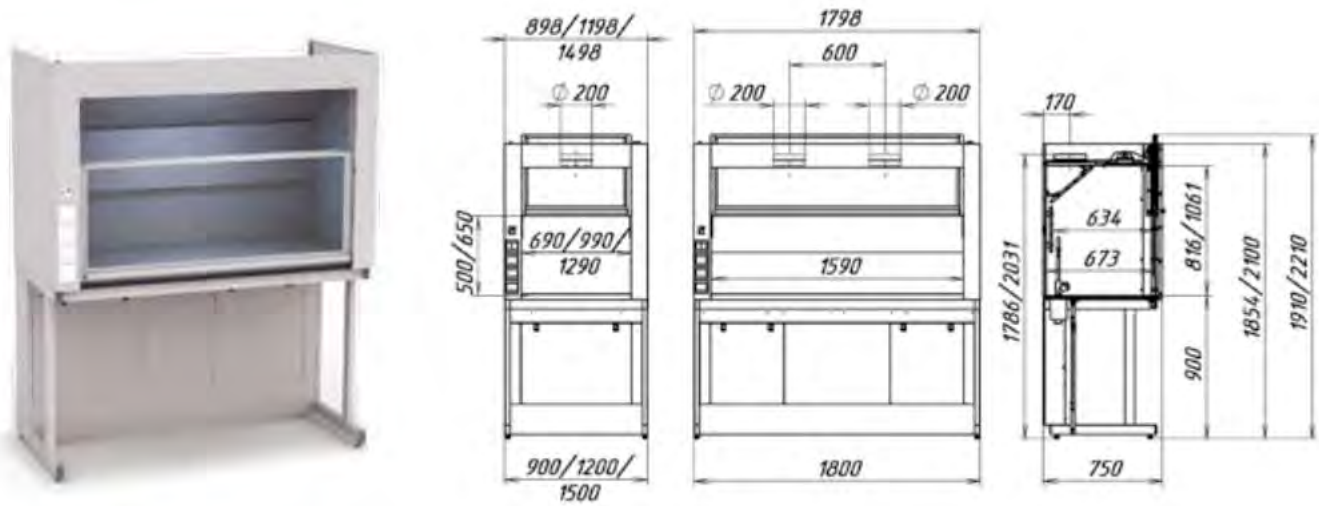

SAVYBĖS:

- Spintos pagrindas – tvirtas metalinis karkasas su miltelinio dažymu, užtikrinančiu konstrukcijos patikimumą
- Korpusas iš metalo lakšto su chemiškai atsparia milteline danga šviesiai pilkos spalvos
- Pakeliamas apsauginis langas su apsauginiu stiklu „Triplex“, kuris leidžia tvirtinti reikiamame aukštyje (nuo 50 iki 500 mm)
- Darbo zonos (angos) įstiklinimas priekyje iki viso aukščio
- Viršutinėje spintelės dalyje sumontuotas Ø200 mm vamzdis, skirtas prijungti prie centrinės ištraukimo sistemos
- IP 65 LED lempa, kurios galia 20W už darbo zonos ribų
- Stalviršis pagamintas iš chemiškai atsparios medžiagos (5 variantai)
- Reguliuojamos atramos kompensuoti grindų nelygumus

KOMPLEKTACIJA:

- 3 euro lizdai (220 V, su uždaru korpusu IP 44)
- 16A diferencialinis grandinės pertraukiklis
- Šviesos jungiklis ir ventiliatoriaus jungiklis (jei yra)
- Elektros laidas (1500 mm ilgio) su euro kištuku

PAPILDOMA ĮRANGA:

- Kanalizacija (iš polipropileno 250x100x150 mm) – dešinysis
- Šalto vandens čiaupas (stacionarus)
- Priedai komunikacijoms prijungti
- Ventiliatorius, kurio našumas 1080 m<sup>3</sup> / h
- Mobili arba pakabinama spintelė




| Darbinis paviršius                 | Matmenys, mm |       |                | Papildoma įranga                                                                              |
|------------------------------------|--------------|-------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | Ilgis        | Gylis | Aukštis        |                                                                                               |
| Porceliano keramika                | 900          | 750   | 1850 m<br>2100 | Vandentiekis (čiaupas + kanalizacija)<br>Dujų tiekimas (čiaupas)<br>Pramoninis ventiliatorius |
| 300x300 Nerūdijantis plienas       | 1200         |       |                |                                                                                               |
| Atsparus chemikalams HPL plastikas | 1500         |       |                |                                                                                               |
| Dirbtinis kvarcinis akmuo          | 1800 m       |       |                |                                                                                               |
| Porcelianas 800x800                |              |       |                |                                                                                               |

TRAUKOS SPINTA MUFELINĖMS/  
DŽIOVINIMO KROSNELĖMS



Traukos spinta, skirta laboratorinių tyrimų metu mufelinėse ar džiovinimo krosnelėse susidariusiems dujiniams produktams pašalinti.

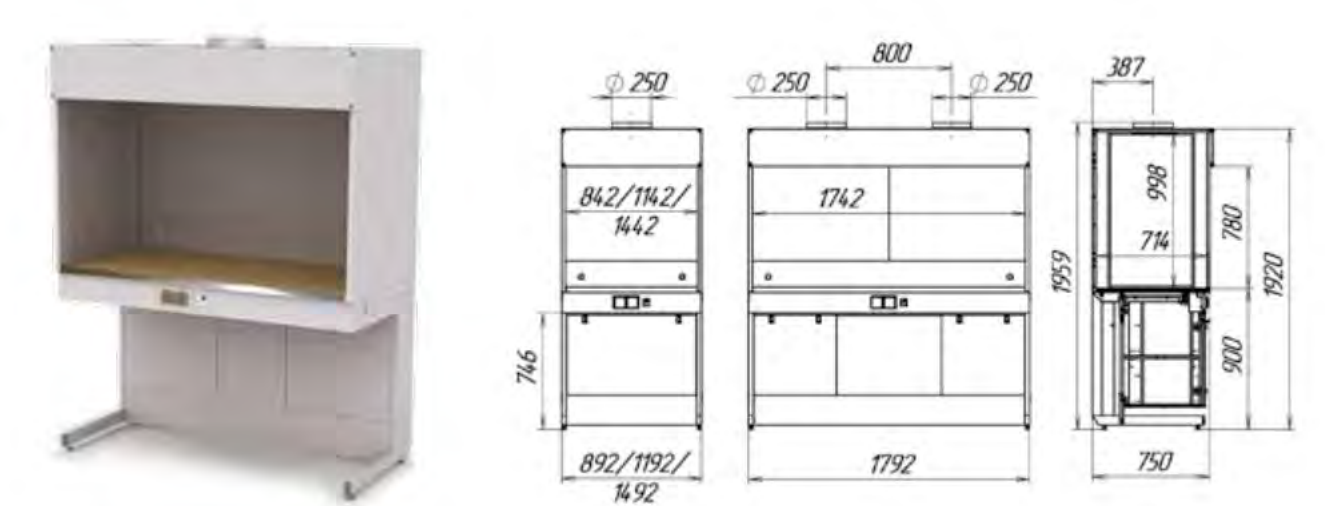

SAVYBĖS:

- Spintos pagrindas – tvirtas metalinis karkasas su miltelinio dažymu, užtikrinantis konstrukcijos patvarumą
- Korpusas iš metalo lakšto su chemiškai atsparia milteline danga šviesiai pilkos spalvos
- Viršutinėje spintos dalyje sumontuotas 250 mm skersmens vamzdis, skirtas prijungti prie centrinės ištraukimo sistemos
- 20W galios IP 65 lempa ne darbo zonoje
- Porcelianinių plytelių stalviršis su nerūdijančio plieno apvadu
- Reguliuojamos atramos grindų nelygumams kompensuoti

KOMPLEKTACIJA

- 2 euro lizdai (220 V, su uždaru korpusu IP 44)
- 16A diferencialinis grandinės pertraukiklis
- Šviesos jungiklis ir ventiliatoriaus jungiklis (jei yra)
- Elektros laidas (1500 mm ilgio) su euro kištuku

PAPILDOMA ĮRANGA:


- 1080 m<sup>3</sup> /h našumo ventiliatorius
- Pakabinama arba mobili spinta



| Darbinis paviršius          | Matmenys, mm                  |       |         | Papildoma įranga                                 |
|-----------------------------|-------------------------------|-------|---------|--------------------------------------------------|
|                             | Ilgis                         | Gylis | Aukštis |                                                  |
| Porceliano keramika 300x300 | 900<br>1200<br>1500<br>1800 m | 750   | 1920 m  | Pakabinama spintelė<br>Pramoninis ventiliatorius |



Ant grindų pastatomas traukos gaubtas skirtas apsaugoti darbuotojus ir pašalinti lakiuosius, dujinius produktus, susidariusius laboratorinių tyrimų ir cheminių reakcijų metu ne laboratorijoje.

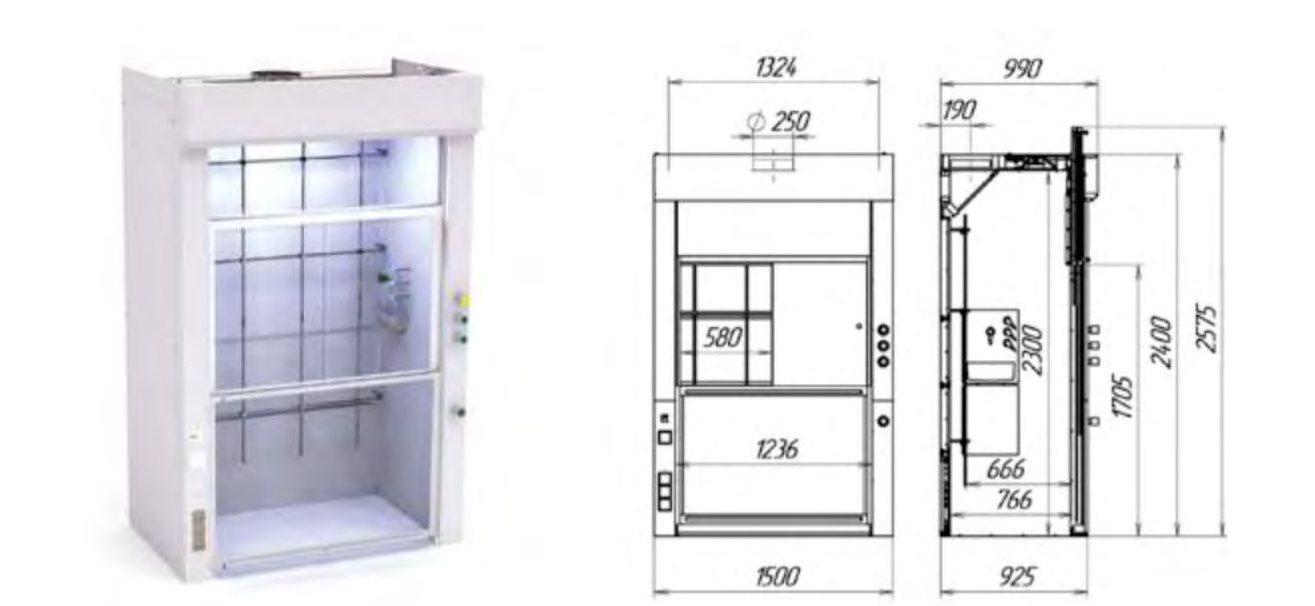

SAVYBĖS:

- Spintos pagrindas – tvirtas metalinis karkasas su miltelinio dažymu, kuris užtikrina konstrukcijos patikimumą
- Korpusas – lakštinis metalas su chemiškai atsparia milteline danga šviesiai pilkos spalvos
- Pakeliamas apsauginis langas su apsauginiu stiklu „Triplex“ yra sujungtas su atsvarais, todėl jį galima tvirtinti reikiamame aukštyje (nuo 50 iki 1705 mm)
- Geresnis darbo zonos matomumas (angos priekyje įstiklinimas visu aukščiu)
- Viršutinėje spintos dalyje sumontuotas Ø250 mm vamzdis prijungimui prie centrinės ištraukimo sistemos
- 20W IP 65 LED šviesa ne darbo zonoje
- Reguliuojamos atramos nelygioms grindims kompensuoti

KOMPLEKTACIJA:

- 3 euro lizdai (220 V, su uždaru korpusu IP 44)
- Diferencialinis jungiklis 16A
- Šviesos jungiklis ir ventiliatoriaus jungiklis (jei yra)
- Elektros laidas (1500 mm ilgio) su euro kištuku
- Nerūdijančio plieno trikojo tinklėlis
- Drenažas (plastikinis 220x90x100 mm)
- Šalto vandens čiaupas (su išoriniu valdymu)
- Trys vožtuvai dujoms (degiosioms, nedegiosioms, vakuuminėms)
- Priedai komunikacijoms prijungti

PAPILDOMA ĮRANGA:

- Ventiliatorius, kurio našumas 1080 m3 /val
- Mobilus stalas



| Darbinis paviršius | Matmenys, mm |       |         | Papildoma įranga                            |
|--------------------|--------------|-------|---------|---------------------------------------------|
|                    | Ilgis        | Gylis | Aukštis |                                             |
| Be stalviršio      | 1500         | 925   | 2400    | Pramoninis ventiliatorius<br>Mobilus stalas |



| Pavadinimas                    | Metalinės                                    | Specialiosios                                                | Atsparios rūgštims                   | Spinta-stalas           | Klasika                                   | Grindinės                                        | Mufelinės                         |
|--------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Paskirtis                      | darbui su įvairių rūgščių ir šarmų tirpalais | darbui su didelės koncentracijos tirpalais                   | darbui aukštoje temperatūroje        | darbui sėdint           | įprastam darbui                           | darbui su didele įranga                          | darbui su mufelinėmis krosnelėmis |
| Funkcionalumas                 | Dvigubos vidinės zonos sienos                | Vidinė zona išklota chemiškai atspariausio plastiko medžiaga | Stiklo plastiko kupolas darbo zonoje | Mažiausi matmenys       | Bazinio modelio be jokių ypatingų savybių | Su trikojo tinkleliu, čiaupais dujoms, vandeniui | Specializuotas                    |
| Lango pakėlimas                | iki 800 mm                                   | iki 800 mm                                                   | iki 650 mm                           | iki 500 mm              | iki 700 mm                                | iki 1700 mm                                      | be lango                          |
| Vamzdžio atšaka                | Ø250 mm                                      | Ø250 mm                                                      | Ø250 mm                              | Ø200 mm                 | Ø250 mm                                   | Ø250 mm                                          | Ø250 mm                           |
| Stalviršis                     | 6 variantai                                  | 6 variantai                                                  | 6 variantai                          | 5 variantai             | 6 variantai                               | be stalviršio                                    | porcelianiniai dirbiniai          |
| Kištukiniai lizdai             | 4 vnt, šoninės plokštės                      | 4 vnt, šoninės plokštės                                      | 4 vnt, šoninės plokštės              | 3 vnt, šoninis skydelis | 3 vnt, apatinis skydelis                  | 3 vnt, šoninis skydelis                          | 2 vnt po stalviršiu               |
| Ilgis, mm                      | 1200 / 1500 / 1800 m                         | 1200/1500/1800                                               | 1200/1500/1800                       | 900 / 1200 / 1500       | 1200 / 1500 / 1800 m                      | 1500                                             | 900 / 1200 / 1500 / 1800          |
| Gylis, mm                      | 850 / 1000                                   | 850 / 1000                                                   | 850 / 1000                           | 750                     | 800                                       | 900                                              | 750                               |
| Aukštis, mm                    | 2100 / 2400                                  | 2100 / 2400                                                  | 2400                                 | 1855/2100               | 2200                                      | 2400                                             | 1920 m                            |
| Papildoma įranga:              |                                              |                                                              |                                      |                         |                                           |                                                  |                                   |
| Vandens čiaupas + kanalizacija | išorės reglamentas                           | išorės reglamentas                                           | išorės reglamentas                   | stalinis kranas         | stalinis kranas                           | išorės reglamentas                               | Nėra                              |
| Reagento kapsulė               | Taip                                         | Taip                                                         | Taip                                 | Ne                      | Taip                                      | Ne                                               | Ne                                |
| Ventiliatorius                 | buitinis                                     | buitinis                                                     | atsparus sprogimui                   | buitinis                | buitinis                                  | buitinis                                         | buitinis                          |




SAVYBĖS:

- Stalas pagamintas iš tvirto miltelinio būdu dengto plieno rėmo
- Du dizaino variantai:
  - su nuimamomis priekinėmis ir šoninėmis plokštėmis laidams, akumuliatoriams ir pan. paslėpti;
  - be plokščių, atviras
- Stalviršis iš chemiškai atsparios medžiagos (7 variantai)
- Leidžiama paskirstyta apkrova – iki 350 kgf/m<sup>2</sup>
- Reguliuojamos atramos kompensuoti grindų nelygumus

PAPILDOMA ĮRANGA:

- Pakabinama arba mobili spintelė
- Lentyna arba titravimo anstatas
- Polimerinio kompozito šoninė plokštė (Nr.4-6)
- Elektros blokas su lizdais

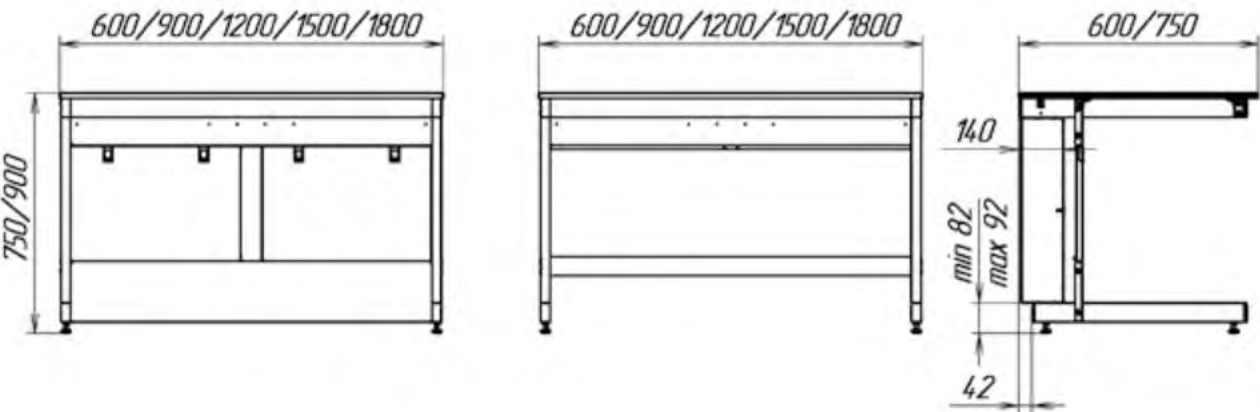

| Darbinis paviršius                           | Matmenys, mm                         |       |         | Įranga                       |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|-------|---------|------------------------------|
|                                              | Ilgis                                | Gylis | Aukštis |                              |
| 1. Aukšto slėgio laminatas                   | 600<br>900<br>1200<br>1500<br>1800 m | 750   | 750     | Su plokštėmis<br>Be plokščių |
| 2. Porcelianinis keramikos dirbinys 300x300  |                                      |       | 900     |                              |
| 3. Nerūdijantis plienas AISI 304             |                                      | 600   | 750     |                              |
| 4. Durcon polimerinis kompozitas             |                                      |       | 900     |                              |
| 5. Cheminiams atsparus HPL plastikas         |                                      |       | 900     |                              |
| 6. Dirbtinis kvarco akmuo                    | 1800 m                               | 600   | 750     | Su plokštėmis<br>Be plokščių |
| 7. Porceliano keramikos dirbiniai 800x800 mm |                                      |       | 900     |                              |





SAVYBĖS:

- Stalo pagrindas pagamintas iš tvirto miltelinio būdu dengto plieno rėmo
- Papildoma standinimo briauna
- Dvi versijos:
  - su nuimamomis priekinėmis ir šoninėmis plokštėmis laidams, akumuliatoriams ir pan. paslėpti;
  - be plokščių, atviras
- Stalviršis iš chemiškai atsparios medžiagos (7 variantai)
- Leidžiama paskirstyta apkrova – iki 500 kgf/m<sup>2</sup>
- Reguliuojamos atramos, kompensuojančios nelygias grindis

PAPILDOMA ĮRANGA:

- Pakabinama arba mobili spintelė
- Lentyna arba titravimo anstatas
- Polimerinio kompozito šoninė plokštė (Nr. 4-6)
- Elektros blokas su lizdais

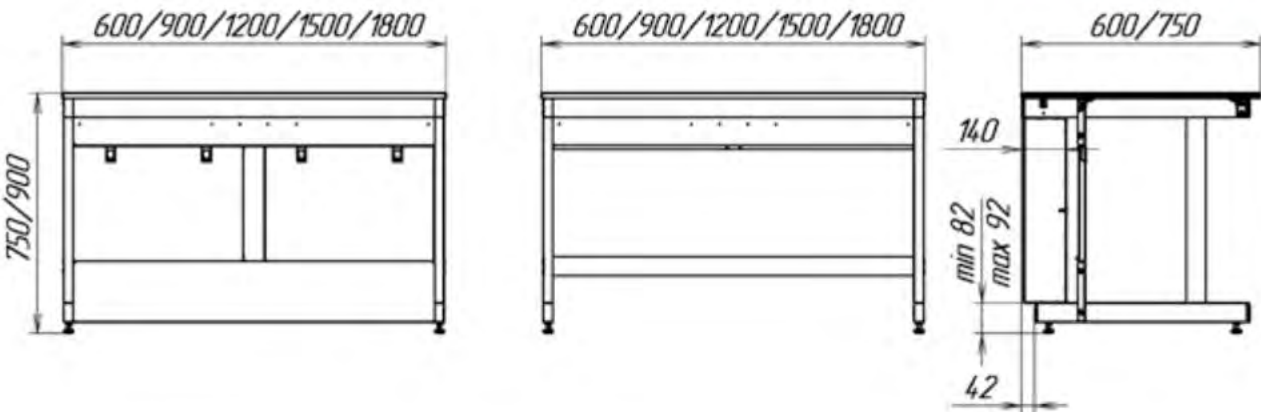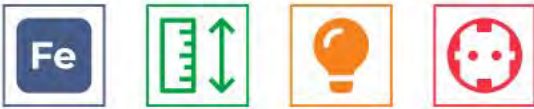

| Darbinis paviršius                             | Matmenys, mm                         |       |         | Įranga                       |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|---------|------------------------------|
|                                                | Ilgis                                | Gylis | Aukštis |                              |
| 1. Aukšto slėgio laminatas                     | 600<br>900<br>1200<br>1500<br>1800 m | 750   | 750     | Su plokštėmis<br>Be plokščių |
| 2. Porcelianinis keramikos dirbinys 300x300 mm |                                      |       | 900     |                              |
| 3. Nerūdijantis plienas AISI 304               |                                      | 600   | 750     |                              |
| 4. Durcon polimerinis kompozitas               |                                      |       | 900     |                              |
| 5. Cheminiams atsparus HPL plastikas           |                                      |       | 900     |                              |
| 6. Dirbtinis kvarco akmuo                      | 1800 m                               | 600   | 750     | Su plokštėmis<br>Be plokščių |
| 7. Porceliano keramikos dirbiniai 800x800 mm   |                                      |       | 900     |                              |



LABORATORINIS  
STALAS SALA




SAVYBĖS:

- Stalas pagamintas iš tvirto miltelinio būdu dengto plieno rėmo
- Du dizaino variantai:
  - su nuimamomis priekinėmis ir šoninėmis plokštėmis laidams, akumuliatoriams ir pan. paslėpti;
  - be plokščių, atviras
- Stalviršis iš chemiškai atsparios medžiagos (7 variantai)
- Leidžiama paskirstyta apkrova – iki 500 kgf/m<sup>2</sup>
- Reguliuojamos atramos, kompensuojančios nelygias grindis

PAPILDOMA ĮRANGA:

- Pakabinamos arba mobilios spintelės
- Lentynos arba titravimo antstatai
- Polimerinio kompozito šoninės plokštės (Nr. 4-6)
- Elektros blokas su lizdais

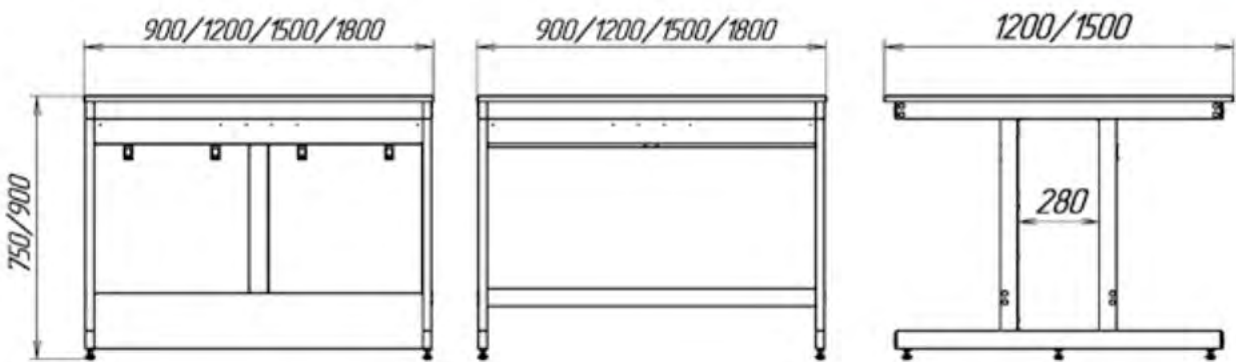

| Darbinis paviršius                           | Matmenys, mm |       |         | Įranga        |
|----------------------------------------------|--------------|-------|---------|---------------|
|                                              | Ilgis        | Gylis | Aukštis |               |
| 1. Aukšto slėgio laminatas                   |              |       |         |               |
| 2. Porcelianinis keramikos dirbiny           |              |       |         |               |
| 300x300 mm                                   | 900          |       |         |               |
| 3. Nerūdijantis plienas AISI 304             | 1200         | 1200  | 750     | Su plokštėmis |
| 4. Durcon polimerinis kompozitas             | 1500         | 1500  | 900     | Be plokščių   |
| 5. Cheminiams atsparus HPL plastikas         |              |       |         |               |
| 6. Dirbtinis kvarco akmuo                    | 1800 m       |       |         |               |
| 7. Porceliano keramikos dirbiniai 800x800 mm |              |       |         |               |

GALINIAI STALAI




SAVYBĖS:

- Stalas pagamintas iš tvirto miltelinio būdu dengto plieno rėmo
- Du dizaino variantai:
  - su nuimamomis priekinėmis ir šoninėmis plokštėmis laidams, akumuliatoriams ir pan. paslėpti;
  - be plokščių, atviras
- Stalviršis iš chemiškai atsparios medžiagos (7 variantai)
- Leidžiama paskirstyta apkrova – iki 500 kgf/m<sup>2</sup>
- Reguliuojamos atramos, kompensuojančios nelygias grindis

PAPILDOMA ĮRANGA:

- Šonas pagamintas iš polimero kompozito (skirtas Nr. 4-6)
- Kriauklė (pagaminta iš polipropileno arba polimero kompozito) – centre
- Laboratorinis maišytuvas FAR
- Priedai komunikacijoms prijungti

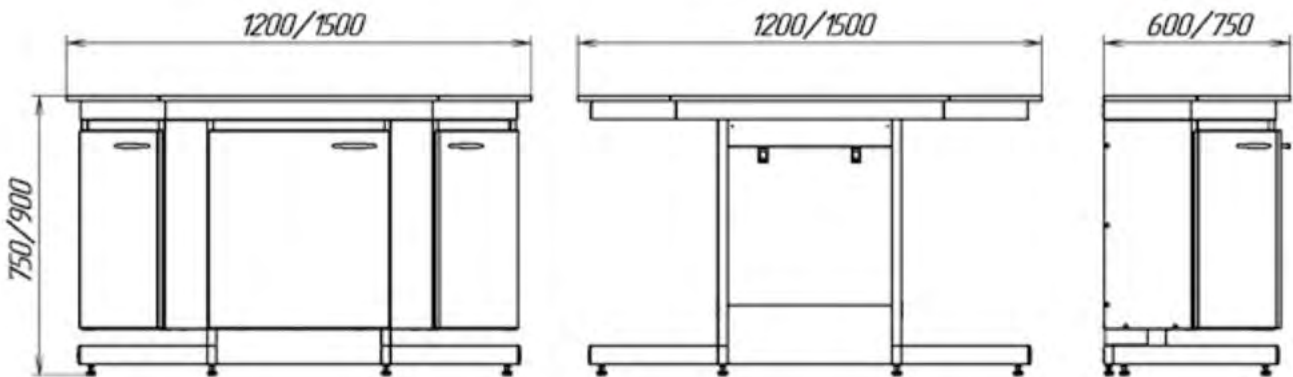

| Darbinis paviršius                           | Matmenys, mm |       |         | Įranga                                     |
|----------------------------------------------|--------------|-------|---------|--------------------------------------------|
|                                              | Ilgis        | Gylis | Aukštis |                                            |
| 1. Aukšto slėgio laminatas                   |              |       |         |                                            |
| 2. Porcelianinis keramikos dirbiny           |              |       |         |                                            |
| 300x300 mm                                   |              |       |         |                                            |
| 3. Nerūdijantis plienas AISI 304             | 1200         | 750   | 750     | Su spintele (B-900) / be spintelės         |
| 4. Durcon polimerinis kompozitas             | 1500         | 600   | 900     | Su vandens tiekimu (kriauklė + maišytuvas) |
| 5. Chemikalams atsparus HPL plastikas        |              |       |         |                                            |
| 6. Dirbtinis kvarco akmuo                    |              |       |         |                                            |
| 7. Porceliano keramikos dirbiniai 800x800 mm |              |       |         |                                            |

LABORATORINIS STALAS SU  
VIENA KRIAUKLE




SAVYBĖS:

- Stalas pagamintas iš tvirto milteliniu būdu dengto plieno rėmo
- Spintelės korpusas iš lakštinio metalo, nuimamas dugnas
- Stalviršis pagamintas iš chemiškai atsparios medžiagos (6 variantai)
- Kriauklė (pagaminta iš polipropileno arba polimerinio kompozito) centre
- Laboratoriniai maišytuvai FAR
- Priedai komunikacijoms prijungti
- Reguliuojamos atramos nelygioms grindims kompensuoti

PAPILDOMA ĮRANGA:

- Polimerinė kompozicinė plokštė (skirta Nr. 4-6)
- Kriauklės perkėlimas į kairę arba dešinę

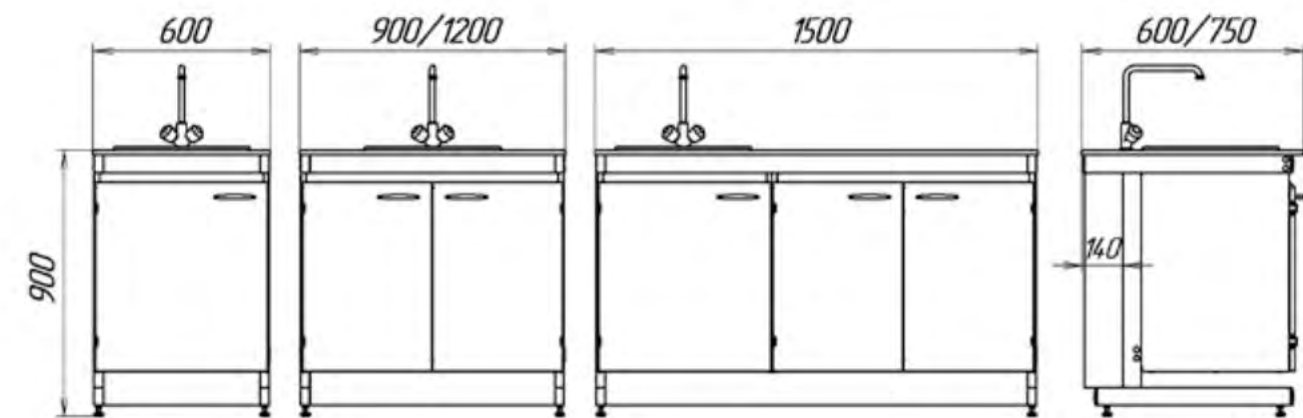

| Darbinis paviršius                               | Matmenys, mm |       |         | Kriauklė                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------|--------------|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  | Ilgis        | Gylis | Aukštis |                                                                                                                                                              |
| 2. Porcelianiniai keramikos dirbiniai 300x300 mm | 600          |       |         | Polimerinis kompozitas:<br>400x400x300 mm<br><br>Polipropilenas:<br>450x368x280 mm,<br>490x390x290 mm<br><br>Nerūdijantis plienas (Nr. 3):<br>500x400x300 mm |
| 3. Nerūdijantis plienas AISI 304                 | 900          | 750   | 900     |                                                                                                                                                              |
| 4. Durcon polimerinis kompozitas                 | 1200         | 600   |         |                                                                                                                                                              |
| 5. Cheminėms medžiagoms atsparus HPL plastikas   | 1500         |       |         |                                                                                                                                                              |
| 6. Dirbtinis kvarco akmuo                        |              |       |         |                                                                                                                                                              |
| 7. Porcelianiniai keramikos dirbiniai 800x800 mm |              |       |         |                                                                                                                                                              |

LABORATORINIS STALAS SU  
DVIEM KRIAUKLĖM




SAVYBĖS:

- Stalas pagamintas iš tvirto milteliniu būdu dengto plieno rėmo
- Spintelės korpusas iš lakštinio metalo, nuimamas dugnas
- Stalviršis pagamintas iš chemiškai atsparios medžiagos (6 variantai)
- Dvi kriauklės (pagamintos iš polipropileno arba polimerinio kompozito) •
- Du FAR laboratoriniai maišytuvai
- Priedai komunikacijoms prijungti
- Reguliuojamos atramos nelygioms grindims kompensuoti

PAPILDOMA ĮRANGA:

- Polimerinė kompozicinė plokštė (skirta Nr. 4-6)

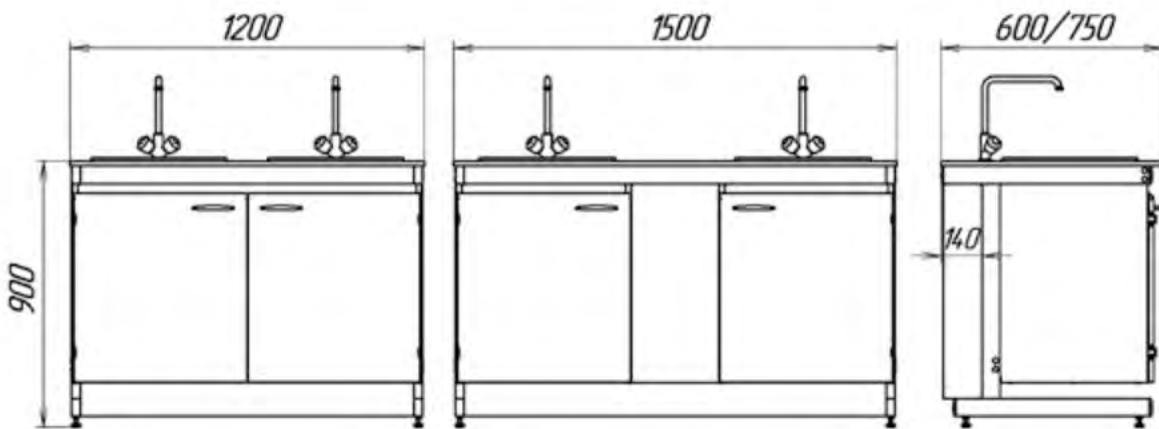

| Darbinis paviršius                               | Matmenys, mm |       |         | Kriauklės                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------|--------------|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  | Ilgis        | Gylis | Aukštis |                                                                                                                                                              |
| 2. Porcelianiniai keramikos dirbiniai 300x300 mm |              |       |         | Polimerinis kompozitas:<br>400x400x300 mm<br><br>Polipropilenas:<br>450x368x280 mm,<br>490x390x290 mm<br><br>Nerūdijantis plienas (Nr. 3):<br>500x400x300 mm |
| 3. Nerūdijantis plienas AISI 304                 | 1200         | 750   | 900     |                                                                                                                                                              |
| 4. Durcon polimerinis kompozitas                 | 1500         | 600   |         |                                                                                                                                                              |
| 5. Cheminėms medžiagoms atsparus HPL plastikas   |              |       |         |                                                                                                                                                              |
| 6. Dirbtinis kvarco akmuo                        |              |       |         |                                                                                                                                                              |
| 7. Porcelianiniai keramikos dirbiniai 800x800 mm |              |       |         |                                                                                                                                                              |



KAMPINIS LABORATORINIS STALAS



Mod. 1




Mod. 2

SAVYBĖS:

- Stalas pagamintas iš tvirto milteliniu būdu dengto plieno rėmo
- Dvi versijos: - vidinė (1 mod.) - išorinė (2 mod.)
- Stalviršis pagamintas iš chemiškai atsparios medžiagos (7 variantai)
- Leidžiama paskirstyta apkrova – iki 350 kgf/m2
- Reguliuojamos atramos, kompensuojančios nelygias grindis

PAPILDOMA ĮRANGA:

- Polimerinė kompozito pusė (skirta Nr. 4-6)
- Elektros blokas su kištukiniais lizdais

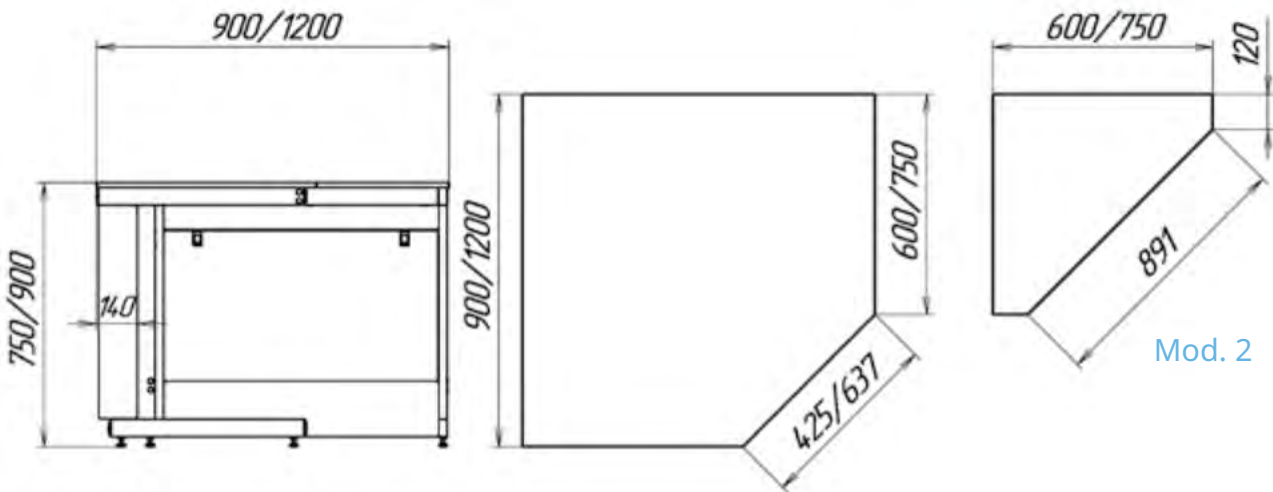

Mod. 2

| Darbinis paviršius                                                                                                                                                                                                                                                              | Matmenys, mm                                                            |       |            | Įranga                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ilgis                                                                   | Gylis | Aukštis    |                              |
| 1. Aukšto slėgio laminatas<br>2. Porcelianinis keramikos dirbinys<br>300x300 mm<br>3. Nerūdijantis plienas AISI 304<br>4. Durcon polimerinis kompozitas<br>5. Cheminiams atsparus HPL plastikas<br>6. Dirbtinis kvarco akmuo<br>7. Porceliano keramikos dirbiniai<br>800x800 mm | Vidinis:<br>1200x1200, 900x900<br><br>Išorinis:<br>750 x 750, 600 x 600 |       | 750<br>900 | Su plokštėmis<br>Be plokščių |

MOBILUS LABORATORINIS STALAS



Mod. 1




Mod. 2



Mod. 3



SAVYBĖS:

- Stalo pagrindas yra tvirtas milteliniu būdu dengtas plieninis rėmas
- Trys versijos: - su rankena (Mod. 1) - su pritvirtintu stalviršiu (Mod. 2) - ant sustiprinto rėmo (Mod. 3)
- Stalviršis pagamintas iš chemiškai atsparios medžiagos
- Keliamoji galia - iki 200 kg
- Atramos - guminiai ratukai su judesio fiksacija

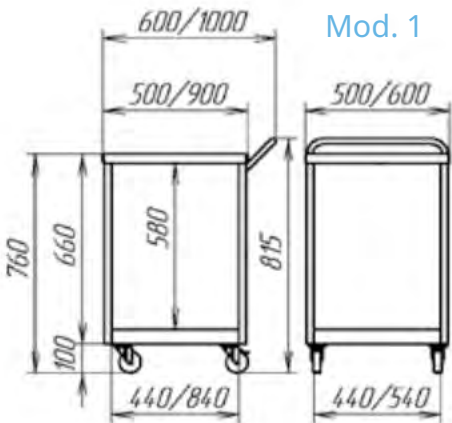

Mod. 1

Mod. 2

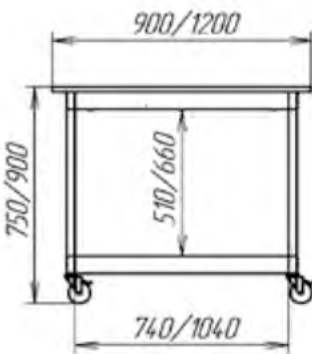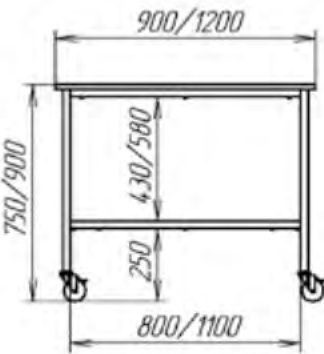

Mod. 3

| Darbinis paviršius                                                           | Matmenys, mm                                                                         |       |                                | Įranga                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                              | Ilgis                                                                                | Gylis | Aukštis                        |                                                                                               |
| 1. Aukšto slėgio laminatas<br>5. Cheminėms medžiagoms atsparus HPL plastikas | Mod. 1: 500 x 500, 900 x 600<br><br>Mod. 2, 3 modifikacija:<br>900 x 600, 1200 x 600 |       | 750 (1 mod.)<br><br>750<br>900 | Mod. 1: rankena, stalviršis su briauna, lentyna<br><br>Mod. 2, Mod. 3:<br>stalviršis, lentyna |




SAVYBĖS:

- Stalas pagamintas iš tvirto milteliniu būdu dengto plieno rėmo
- Dvi vykdymo parinktys:
  - rėmas,
  - su dvigubu rėmu ir apvažu (korpusas pagamintas iš medžio drožlių plokštės arba metalo)
- 60 mm storio natūralaus poliruoto granito plokštė ant guminių amortizatorių (amortizatorių)
- Reguliuojamos atramos nelygioms grindims kompensuoti

PAPILDOMA ĮRANGA:

- Elektros blokas su rozetėmis
- Apsauginis dangtelis svarstyklėms izoliuoti

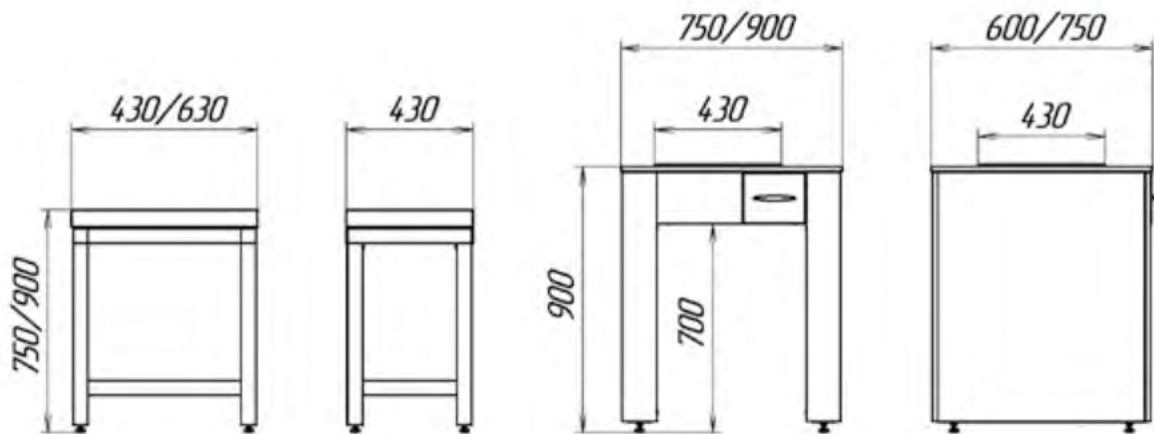

| Darbinis paviršius                                                              | Matmenys, mm |            |            | Įranga                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 | Ilgis        | Gylis      | Aukštis    |                                                                  |
| Natūralus poliruotas granitas                                                   | 630<br>430   | 430        | 750<br>900 | Granito plokštė<br>630/430x430x60 mm                             |
| 1. Aukšto slėgio laminatas<br>5. Cheminėms medžiagoms atsparus<br>HPL plastikas | 750<br>900   | 750<br>600 | 900        | Granito plokštė<br>430x430x60 mm,<br>stalčius įvairiems svoriams |




SAVYBĖS:

- Stalo pagrindas pagamintas iš sustiprinto rėmo su milteliniu dažymu
- Dvi vykdymo parinktys:
  - su nuimamomis priekinėmis ir šoninėmis plokštėmis laidams, akumuliatoriams ir pan. paslėpti;
  - be plokščių, atviras
- Viena arba dvi 60 mm storio natūralaus poliruoto granito plokštės (D-1200) ant guminių amortizatorių (amortizatorių)
- Reguliuojamos atramos nelygioms grindims kompensuoti

PAPILDOMA ĮRANGA:

- Elektros blokas su rozetėmis
- Apsauginis dangtelis svarstyklėms izoliuoti

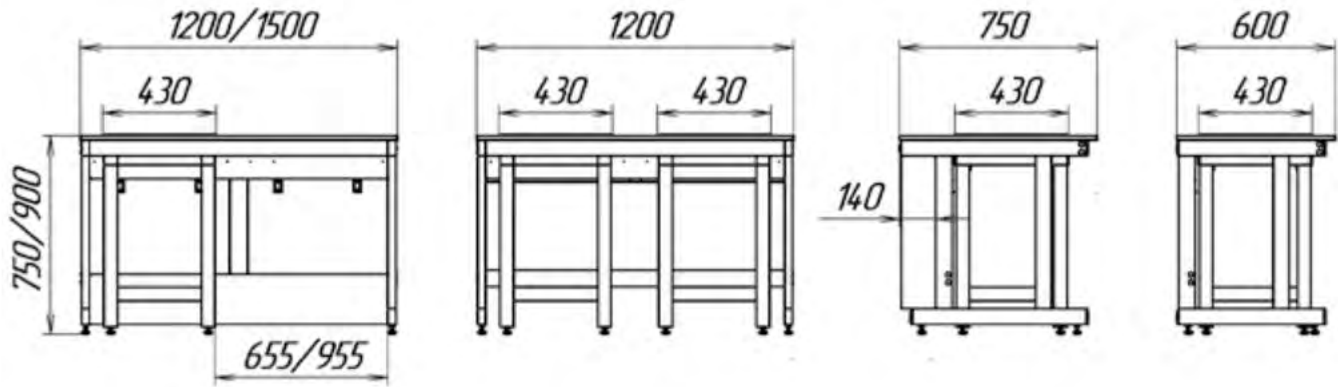

| Darbinis paviršius                                                              | Matmenys, mm |            |            | Įranga                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 | Ilgis        | Gylis      | Aukštis    |                                                                      |
| 1. Aukšto slėgio laminatas<br>5. Cheminėms medžiagoms atsparus<br>HPL plastikas | 1200<br>1500 | 750<br>600 | 750<br>900 | Su plokštėmis<br>Be plokščių<br><br>Granito plokštė<br>430x430x60 mm |



LABORATORINIS STALAS  
Aštuonkampė sala




SAVYBĖS:

- Stalas pagamintas iš tvirto miltelinio būdu dengto plieno rėmo
- Stalo centre yra stelažas su lizdų bloku (4 vnt) ir diferencialiniu išjungėju
- Stalviršis pagamintas iš chemiškai atsparios medžiagos (5 variantai)
- Leidžiama paskirstyta apkrova – iki 350 kgf/m<sup>2</sup>
- Reguliuojamos atramos nelygioms grindims kompensuoti



PAPILDOMA ĮRANGA:

- Pakabinama spintelė iš metalo arba medžio drožlių plokštės
- Polimerinė kompozicinė plokštė (skirta Nr. 5-6)

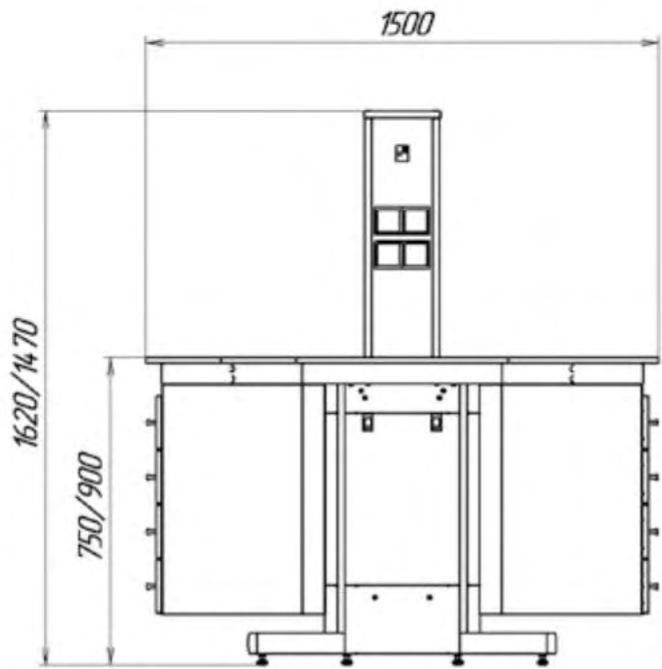

| Darbinis paviršius                                                                                                                                                                                                | Matmenys, mm |       |            | Įranga                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                   | Ilgis        | Gylis | Aukštis    |                                                                 |
| 1. Aukšto slėgio laminatas<br>2. Porcelianiniai keramikos dirbiniai 300x300 mm<br>5. Cheminėms medžiagoms atsparus HPL plastikas<br>6. Dirbtinis kvarco akmuo<br>7. Porcelianiniai keramikos dirbiniai 800x800 mm | 1500 x 1500  |       | 750<br>900 | Medienos drožlių plokštės spintelė arba metalo spintelė (B-900) |

LABORATORINIAI STALAI



Laboratoriniai stalai



| Pavadinimas           | Montuojamas ant sienos                                                      | Sustiprintas                                                         | Sala                                                                 | Pristatomas                                              | Kampas                                    | Aptarnavimas       | Mobilusis                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Modifikacija          | su plokštėmis/ be plokščių                                                  | su plokštėmis/ be plokščių                                           | su plokštėmis/ be plokščių                                           | su plokštėmis/ be plokščių                               | su plokštėmis/ be plokščių išorėje viduje | su rankena         | Išardomas rėmas<br>Suvirintas rėmas |
| Pakabinamos spintelės | metalo / medžio drožlių plokštės visiškai / iš dalies plieno / be spintelių | metalo / medžio drožlių plokštės visiškai / iš dalies / be spintelių | metalo / medžio drožlių plokštės visiškai / iš dalies / be spintelių | metalo / medžio drožlių plokštės visiškai / be spintelių | be spintelių                              | be spintelių       | be spintelių                        |
| Ilgis, mm             | 600 / 900 / 1200 / 1500 / 1800                                              | 600 / 900 / 1200 / 1500 / 1800                                       | 900 / 1200 / 1500 / 1800                                             | 1200/1500                                                | 600 x 600, 750x750                        | 900x900, 1200x1200 | 500x500<br>900x600                  |
| Gylis, mm             | 600/750                                                                     | 600/750                                                              | 1200/1500                                                            | 600/750                                                  | 750 / 900                                 | 750 / 900          | 750                                 |
| Aukštis, mm           | 750 / 900                                                                   | 750 / 900                                                            | 750 / 900                                                            | 750 / 900                                                | 750 / 900                                 | 750                | 750 / 900                           |

Ypatingi stalai



| Pavadinimas           | Kriauklės staliukas                                                                | Kriauklės staliukas | Pristatomas su kriaukle | Svėrimo stalas                             |           | Svėrimo stalas stule        |                       | Prietaisams                                       | 8 kampų sala                                             |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Modifikacija          | 1 kriauklė                                                                         | 2 kriauklės         | 1 kriauklė              | balastinė medžio drožlių plokštė / metalas | rėmo tipo | su plokštėmis / be plokščių |                       | su lizdais / be lizdų                             | su prailginimu su lizdais                                |
|                       | Kriauklės medžiaga: polipropilenas / epoksidinis kompozitas / nerūdijantis plienas |                     |                         |                                            |           | 1 granitinė plokštė         | 2 granitinės plokštės |                                                   |                                                          |
| Pakabinamos spintelės | metalo                                                                             | metalo              | metalo                  | be spintelių                               |           | be spintelių                |                       | 2 stalčiai<br>Medienos drožlių plokštės / metalas | metalo / medžio drožlių plokštės visiškai / be spintelių |
| Ilgis, mm             | 600 / 900 / 1200 / 1500 / 1800                                                     | 1200/1500           | 1200/1500               | 750 / 900                                  | 630       | 1200/1500 1200              |                       | 1200/1500                                         | 1500                                                     |
| Gylis, mm             | 600/750                                                                            | 600/750             | 600/750                 | 750/600                                    | 430       | 600/750                     |                       | 600/750                                           | 1500                                                     |
| Aukštis. mm           | 900                                                                                | 900                 | 900                     | 750 / 900                                  |           | 750 / 900                   |                       | 900 (1050)                                        | 750 / 900 (1470 / 1620)                                  |




SAVYBĖS:

- Antstato pagrindas yra išardoma konstrukcija, pagaminta iš milteliniu būdu dengto plieno lakšto
  - Dvi versijos: montuojamas ant sienos arba stalo
- Reguliuojamos lentynos su perimetro briauna pagamintos iš chemiškai apdorotos patvarios medžiagos (3 variantai)
- Dulkėms ir drėgmei atsparūs lizdai (IP 44)
  - LED lempa apatinėje lentynoje su apsaugine plokšte

GALIMAS VARIANTAS:

- Be kištukinių lizdų

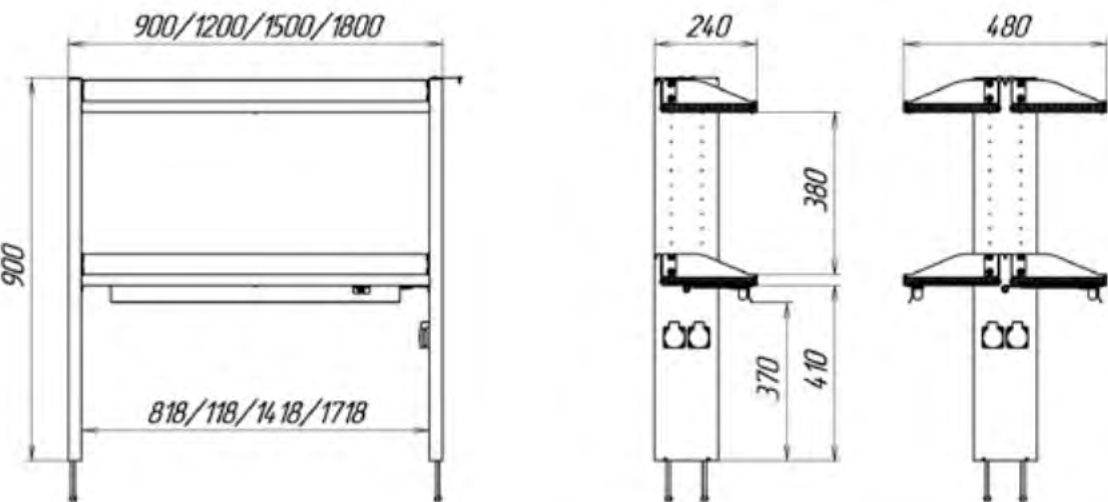

| Lentynos medžiaga                            | Matmenys, mm |       |         | Įranga                      |
|----------------------------------------------|--------------|-------|---------|-----------------------------|
|                                              | Ilgis        | Gylis | Aukštis |                             |
| Laminuota medžio drožlių plokštė             | 900          | 240   | 900     | Sieninis: 2 lizdai, 1 lempa |
| Aukšto slėgio laminatas                      | 1200         |       |         |                             |
| Cheminėms medžiagoms atsparus plastikas 6 mm | 1500         |       |         | Sala: 4 lizdai, 2 lempos    |
|                                              | 1800 m       |       |         |                             |




SAVYBĖS:

- Antstato pagrindas yra išardoma konstrukcija, pagaminta iš milteliniu būdu dengto plieno lakšto
- Dvi versijos: montuojamas ant sienos arba saloje
- Spintelės korpusas pagamintas iš metalo arba laminuotos medžio drožlių plokštės
- Lizdai atsparūs dulkėms ir drėgmei (IP 44)
- LED lempa apatinėje lentynoje su apsaugine plokšte

PAPILDOMA ĮRANGA:

- Stiklinės stumdamos durys
- Be kištukinių lizdų

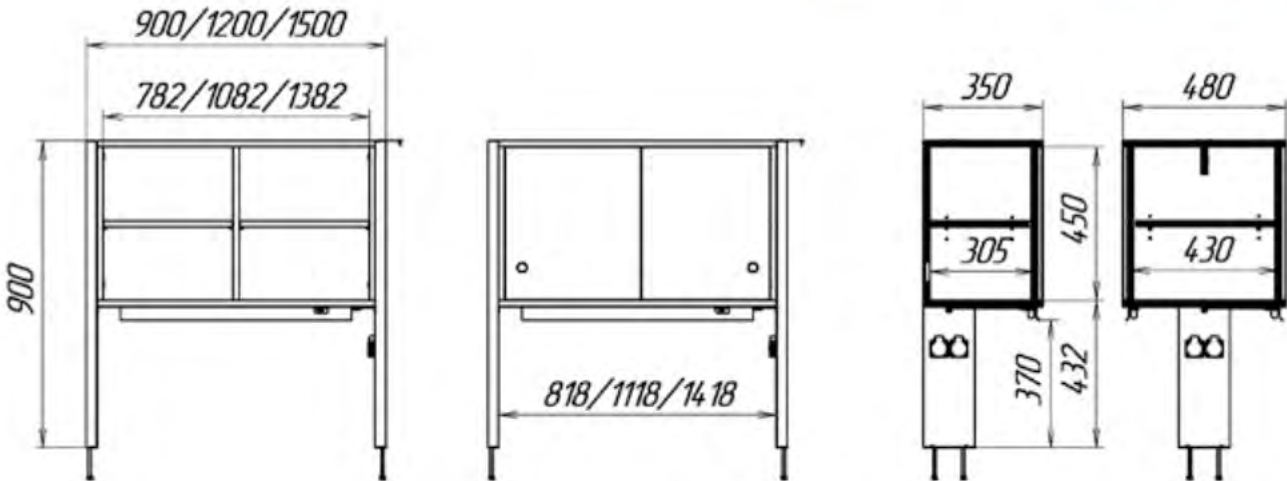

| Būsto medžiaga                                        | Matmenys, mm |       |         | Įranga                      |
|-------------------------------------------------------|--------------|-------|---------|-----------------------------|
|                                                       | Ilgis        | Gylis | Aukštis |                             |
| Lakštinis plienas<br>Laminuota medžio drožlių plokštė | 900          | 350   | 900     | Sieninis: 2 lizdai, 1 lempa |
|                                                       | 1200         |       |         | Sala: 4 lizdai, 2 lempos    |
|                                                       | 1500         |       |         | Papildomai: stiklinės durys |



TITRAVIMO PRIEDAI  
LABORATORINIAMS STALAMS




SAVYBĖS:

- Antstato pagrindas išardoma lakštinio plieno konstrukcija, padengtas miltelinio būdu
- Keturi dizaino variantai:
  - sieninis, salinis, kombinuotas, dvipusis
- Nerūdijančio plieno stovai su biuretės laikikliais
- Matinio stiklo apšviestas ekranas tolygiai, išsklaidytai šviesai
- Lizdai yra apsaugoti nuo dulkių ir drėgmės (IP 44)
- LED lempa apačioje apšviesti stalo darbinį paviršių

PILNAS RINKINYS:

- Salos antstatas kitoje pusėje turi reguliuojamą lentyną ir lempą

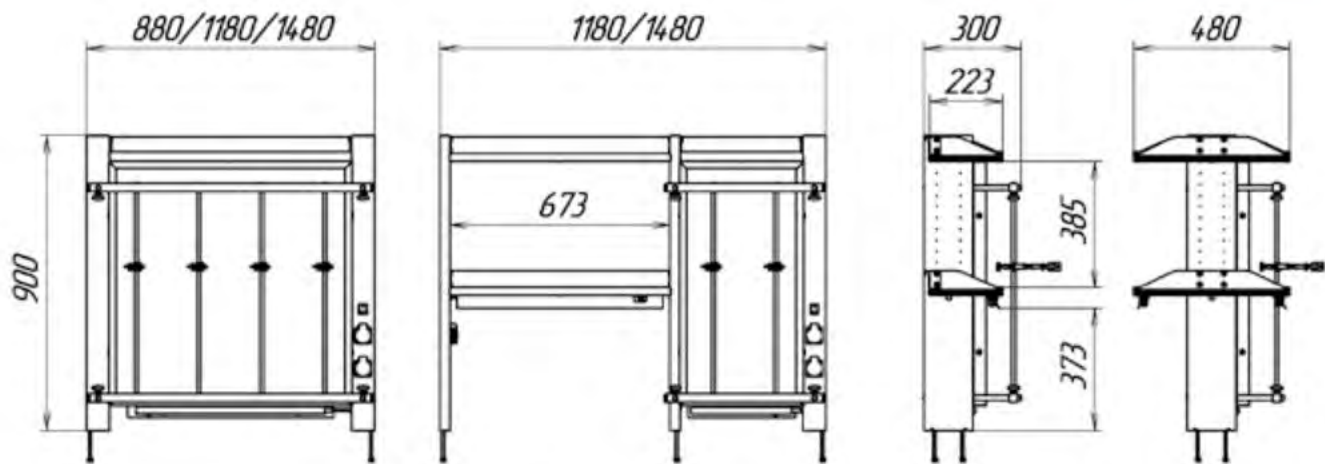


| Lentynos medžiaga                            | Matmenys, mm |            |         | Įranga                                |
|----------------------------------------------|--------------|------------|---------|---------------------------------------|
|                                              | Ilgis        | Gylis      | Aukštis |                                       |
| Aukšto slėgio laminatas                      | 880          | 300        | 900     | Siena, sala: 2/4 lizdai, 4/5/6 stovai |
| Cheminėms medžiagoms atsparus plastikas 6 mm | 1180         | 480 (gili) |         | Kombinuotas: 2/4 lizdų, 2/3 stovai    |
|                                              | 1480 m       |            |         | Dvipusis: 4 lizdai, 8/10 stovai       |

LABORATORINIŲ INDŲ  
DŽIOVYKLĖS



INDŲ DŽIOVYKLĖ:

- Džiovinimo paviršius – baltas stiklo pluoštas
- Galimybės:
  - 18 / 22 / 26 atramos;
  - tvirtinimas ant sienos / stalviršio
- Atraminė medžiaga – baltas plastikas
- Džiovykloje sumontuotas stiklo pluošto padėklas su vamzdeliu susikaupusiam vandeniui nuleisti.
- Rėmo atramos stalviršiui iš juodo metalo arba nerūdijančio plieno vamzdžių su miltelinio dažymu

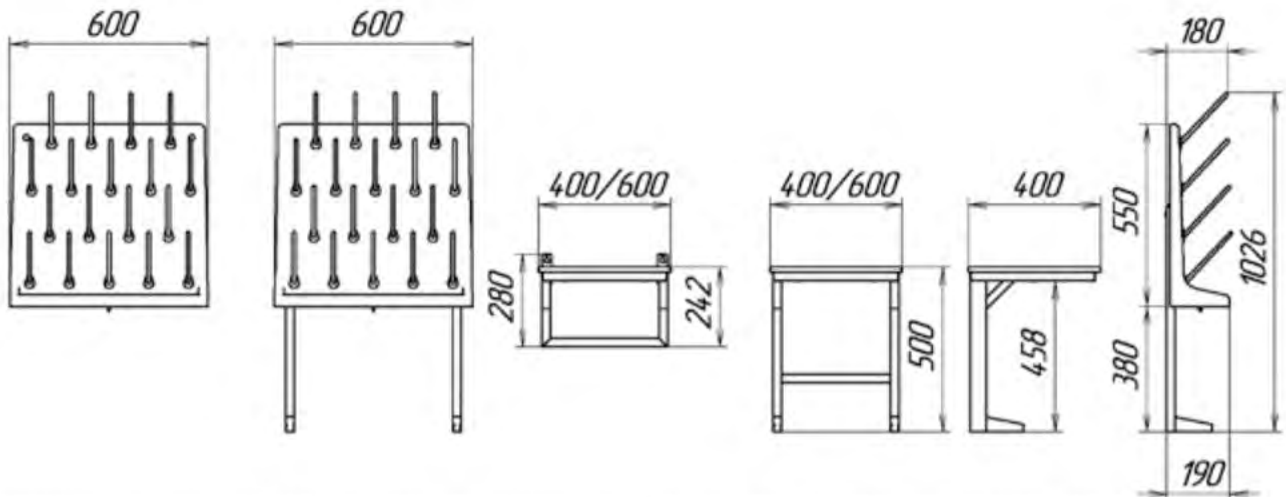


| Darbinis paviršius                                                      | Matmenys, mm |       |            | Įranga                                             |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------------|----------------------------------------------------|
|                                                                         | Ilgis        | Gylis | Aukštis    |                                                    |
| Stiklo pluoštas                                                         | 600          | 180   | 550<br>930 | Džiovykla su 18/22/26 atramų                       |
| Aukšto slėgio laminatas<br>Cheminėms medžiagoms atsparus plastikas 6 mm | 400<br>600   | 400   | 280<br>500 | Lentyna po distiliatoriumi su tvirtinimo detalėmis |

PAKABINAMOS SPINTELĖS  
LABORATORINIAMS  
STALAMS



- SAVYBĖS:**
- Spintelės pagrindas yra išardoma konstrukcija iš metalo arba medžio drožlių plokštės
  - Dizaino variantai:
    - 1 durys (kairėje arba dešinėje), lentyna viduje
    - 2 durys (ilgis: 900, 1200, 1500), lentyna viduje
  - Tvirtinimas prie laboratorinių stalų
  - Metalinės spintos turi dureles su 270° pilnai atsidarančiomis vyriais

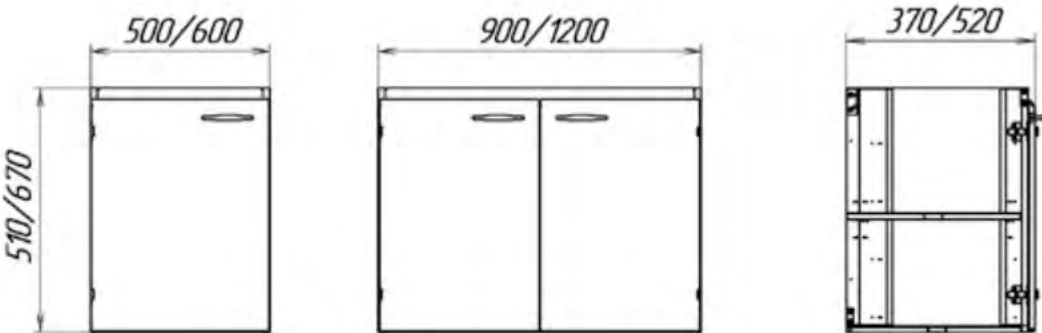


| Medžiaga                         | Matmenys, mm |       |             | Modifikacija                                 |
|----------------------------------|--------------|-------|-------------|----------------------------------------------|
|                                  | Ilgis        | Gylis | Aukštis     |                                              |
| Lakštinis plienas                | 500          | 520   | 670         | Stalams su plokštėmis<br>Stalams be plokščių |
| Laminuota medžio drožlių plokštė | 600          |       | 670         |                                              |
|                                  | 900          | 370   | 510 (D-500) |                                              |
|                                  | 1200         |       |             |                                              |

PAKABINAMOS SPINTELĖS SU STALČIAIS  
LABORATORINIAMS STALAMS



- SAVYBĖS:**
- Spintelės pagrindas – išardoma konstrukcija iš metalo arba medžio drožlių plokštės
  - Dizaino galimybės:
    - stalčiai
    - stalčius viršuje ir durelės apačioje
    - durelės kairėje, stalčiai dešinėje (ilgis: 1200, 1500)
  - Tvirtinimas prie laboratorinių stalų
  - Pilnai prailginami rutuliniai kreiptuvai metaliniuose stalčiuose

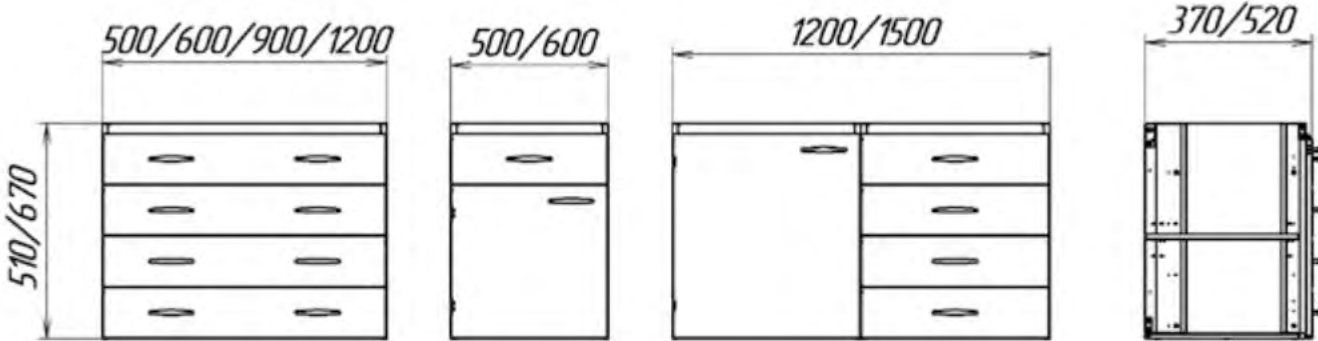


| Medžiaga                         | Matmenys, mm |       |             | Modifikacija                                 |
|----------------------------------|--------------|-------|-------------|----------------------------------------------|
|                                  | Ilgis        | Gylis | Aukštis     |                                              |
| Lakštinis plienas                | 500          | 520   | 670         | Stalams su plokštėmis<br>Stalams be plokščių |
| Laminuota medžio drožlių plokštė | 600          |       | 670         |                                              |
|                                  | 900          | 370   | 510 (D-500) |                                              |
|                                  | 1200         |       |             |                                              |
|                                  | 1500         |       |             |                                              |
|                                  |              |       |             |                                              |





SAVYBĖS:

- Spintelės pagrindas – išardoma konstrukcija iš metalo arba medžio drožlių plokštės.
- Dizaino variantai:
  - durys (lentyne viduje)
  - stalčiai
  - stalčius viršuje, durelės apačioje
- Įrengta spyna su 2 raktais
- Atramos – gumuoti ratukai su judesio fiksacija
- Metalinės spintelės turi dureles su 270° visiškai atsidarančiomis vyriais, stalčiais ant pilnai ištraukiamų kreiptuvų

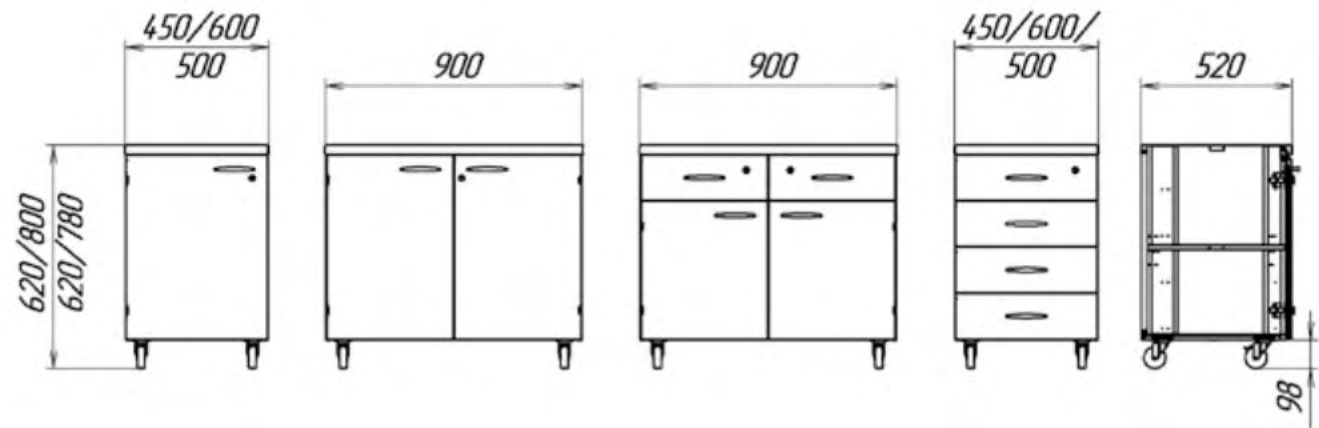

| Medžiaga                         | Matmenys, mm                            |       |                               | Įranga                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------|-------|-------------------------------|--------------------------------|
|                                  | Ilgis                                   | Gylis | Aukštis                       |                                |
| Lakštinis plienas                | 450 (drožlių plokštės)<br>500 (metalas) | 520   | 620<br>800 (drožlių plokštės) | Ritininiai ratukai<br>Užraktas |
| Laminuota medžio drožlių plokštė | 600 (drožlių plokštės)<br>900           |       | 780 (metalas)                 |                                |



Laboratoriniai antstatai



| Pavadinimas       | Servisui montuojama ant sienos              | Paslaugų sala                               | Aptarnavimo su spintele                      | Titravimo, tvirtinama ant sienos | Titravimo sala                | Indų džiovyklė                        | Lentynėlė distiliatoriui |
|-------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Stalo tipas       | sieninis, sutvirtintas                      | sala                                        | sieninis, sutvirtintas, sala                 | sieninis, sutvirtintas           | sala                          | kriauklė                              | kriauklė                 |
| Modifikacija      | su lizdais / be lizdų                       | su lizdais                                  | su lizdais / be stiklinės durys / atidarytos | su lizdais tvirtas / sujungti    | su lizdais tvirtas / sujungti | 18/22/26 vietų ant stalo / ant sienos | ant stalo ant sienos     |
| Lentynos medžiaga | Medienos drožlių plokštės / LVT / plastikas | Medienos drožlių plokštės / LVT / plastikas | Medienos drožlių plokštės / metalas          | LVT / plastikas                  | LVT / plastikas               | stiklo pluošto                        | LVT / plastikas          |
| Ilgis, mm         | 600 / 900 / 1200 / 1500 / 1800              | 900 / 1200 / 1500 / 1800                    | 900 / 1200 / 1500                            | 900 / 1200 / 1500                | 900 / 1200 / 1500             | 600                                   | 400/600                  |
| Gylis, mm         | 240                                         | 480                                         | 350 / 480 (o)                                | 300                              | 480                           | 190 180                               | 400                      |
| Aukštis, mm       | 900                                         | 900                                         | 900                                          | 300                              | 900                           | 990 550                               | 500 300                  |

Spintelės



| Pavadinimas | Pakabinama durys / stalčiai         | Pakabinama                          | Pakabinama dviejų sekcijų           | M*bili durys / stalčiai             | Kombinuota mobili                   | Mobili dvivietė                     | Stalčius pakabinamas                |
|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Medžiaga    | Medienos drožlių plokštės / metalas | Medienos drožlių plokštės / metalas | Medienos drožlių plokštės / metalas | Medienos drožlių plokštės / metalas | Medienos drožlių plokštės / metalas | Medienos drožlių plokštės / metalas | Medienos drožlių plokštės / metalas |
| Užraktas    | Ne                                  | Ne                                  | Ne                                  | Taip                                | Taip                                | Taip                                | Ne                                  |
| Ilgis, mm   | (500) / 600 / 900 / 1200            | 600 / 900 / 1200 / 1500             | 1200/1500                           | 450/600                             | 450/600                             | 900                                 | 500 / 600 / 900                     |
| Gylis, mm   | 520/370                             | 520/370                             | 520/370                             | 520                                 | 520                                 | 520                                 | 520/370                             |
| Aukštis, mm | (510) / 670                         | 670                                 | 670                                 | 620/780                             | 620/780                             | 620/780                             | 194                                 |




### SAVYBĖS:

- Spinta sudaryta iš išardomos skardos konstrukcijos
- Du dizaino variantai:
  - su ventiliuojamais skyriais;
  - su laikymo kapsulėmis ir stalčiumi apačioje (D-600)
- Spintoje yra vamzdis prijungimui prie ventiliacijos ir turi rūgštims atsparų oro kanalą
- Reguluojamos kojėlės nelygioms grindims kompensuoti

### PILNAS RINKINYS:

- Kapsulės iš plastiko, polipropileno arba metalo
- Viršutinės durys metalinės arba stiklinės aliuminio rėme

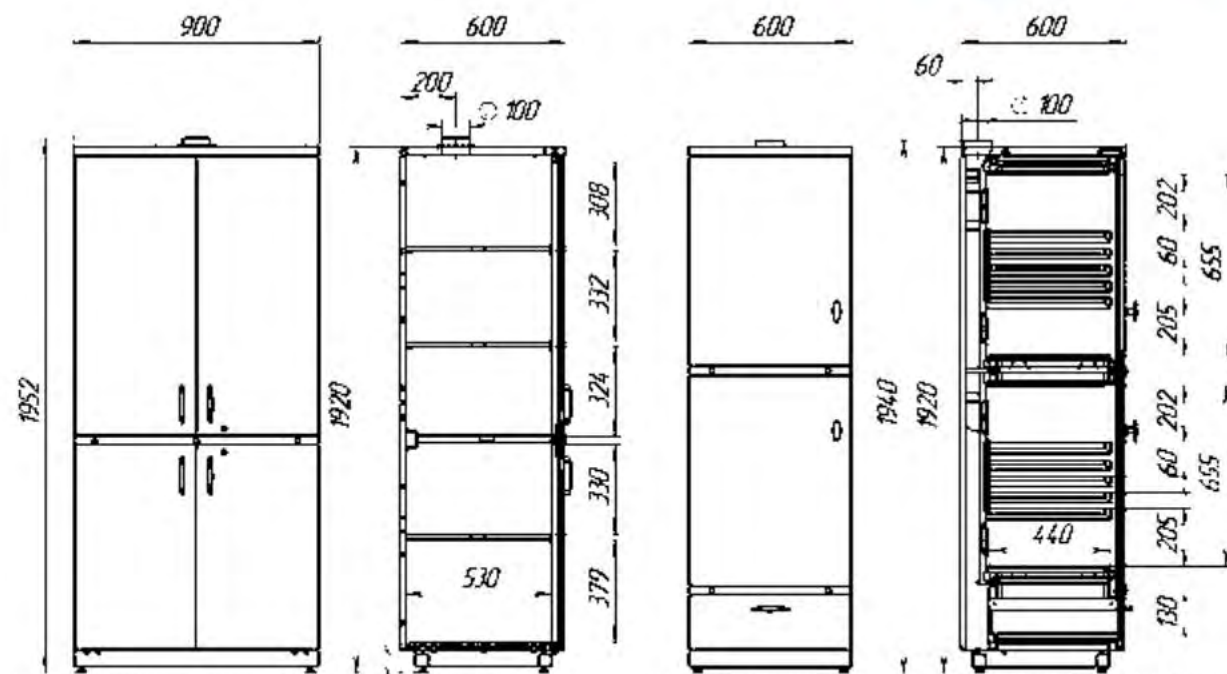

| Korpuso medžiaga  | Matmenys, mm |       |         | Įranga                                                     |
|-------------------|--------------|-------|---------|------------------------------------------------------------|
|                   | Ilgis        | Gylis | Aukštis |                                                            |
| Lakštinis plienas | 600<br>900   | 600   | 1920 mm | Užraktas<br>Vamzdis Ø100 mm<br>2 reagentų kapsulės (D-600) |




SAVYBĖS:

- Gaminio pagrindas yra išardoma lakštinio metalo konstrukcija
- Du dizaino variantai: spinta ir spintelė
- Galimybė prisijungti prie tiekiamo ir ištraukiamo vėdinimo sistemos
- Atsparumas ugniai mažiausiai 90 minučių (90 tipas pagal ISO 834)
- Sukurta pagal EN 14470-1 reikalavimus
- Automatinis durų uždarymas esant 50 °C temperatūrai
- Automatinis vėdinimo kanalų uždarymas esant aukštesnei nei 70 °C oro temperatūrai

### PILNAS RINKINYS:

- Ergonomiška raktų spyna, 2 raktai
- Dvigubas padėklas saugiam skysčių surinkimui išsiliejus
- Specialus sandariklis durims sandarinti gaisro atveju

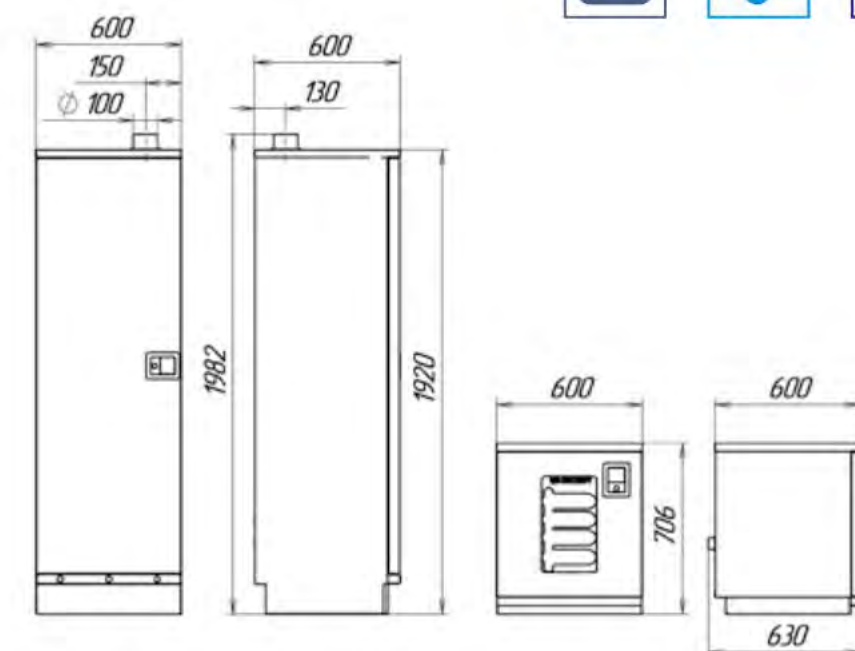

| Korpuso medžiaga  | Matmenys, mm |       |               | Įranga                                                                                              |
|-------------------|--------------|-------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Ilgis        | Gylis | Aukštis       |                                                                                                     |
| Lakštinis plienas | 600          | 600   | 1920 m<br>706 | Vėdinimo anga Ø100 mm<br>Išleidimo anga su apsauginiu tinkleliu Ø50 mm<br>Ugniai atspari izoliacija |






SAVYBĖS:

- Pagaminta iš lakštinio metalo arba laminuotos medžio drožlių plokštės
- Vienvėrė 2 durims ir dvivėrė 4 durims
- Viršutinės durys gali būti stiklinės
- Reguliuojamos kojelės nelygioms grindims kompensuoti
- 400 mm gylio spintoje papildomai sumontuotas laikiklis, skirtas tvirtinimui prie sienos

PILNAS RINKINYS:

- Spyna su raktais
- Reguliuojamos lentynos (2 viršutinėje dalyje, 1 apatinėje)

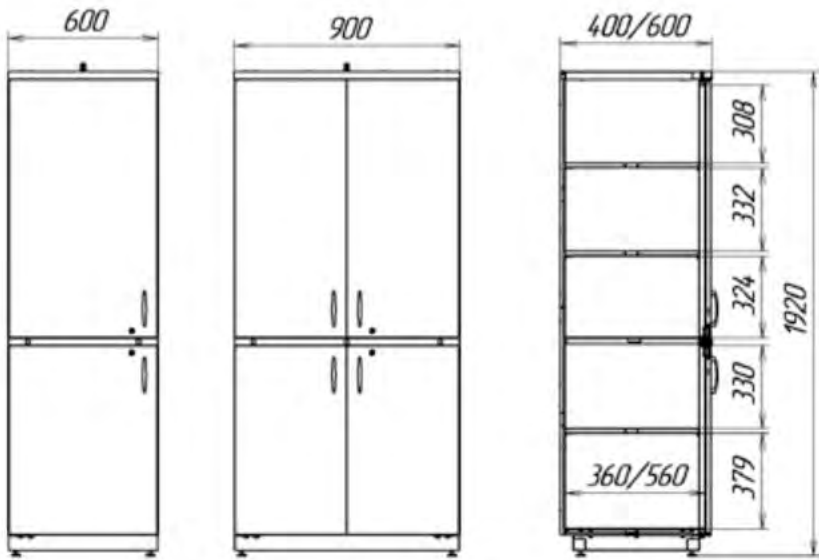

| Korpuso medžiaga                 | Matmenys, mm |       |         | Įranga                                        |
|----------------------------------|--------------|-------|---------|-----------------------------------------------|
|                                  | Ilgis        | Gylis | Aukštis |                                               |
| Lakštinis plienas                | 600          | 600   | 1920 m  | Viršutinių durų stiklas arba korpuso medžiaga |
| Laminuota medžio drožlių plokštė | 900          | 400   |         |                                               |




SAVYBĖS:

- Du dizaino variantai:
  - vėdinamos metalinės ant aukštų kojų
  - spintos iš metalinės arba laminuotos medžio drožlių plokštės
- Spinta vertikalia pertvara padalinta į dvi dalis
- Reguliuojamos atramos nelygioms grindims kompensuoti
- Spintoje galima papildomai įrengti sulankstomą suoliuką

PILNAS RINKINYS:

- Spyna su raktais
- Lentynos skrybėlėms, batams, drabužių strypas / kronšteinas

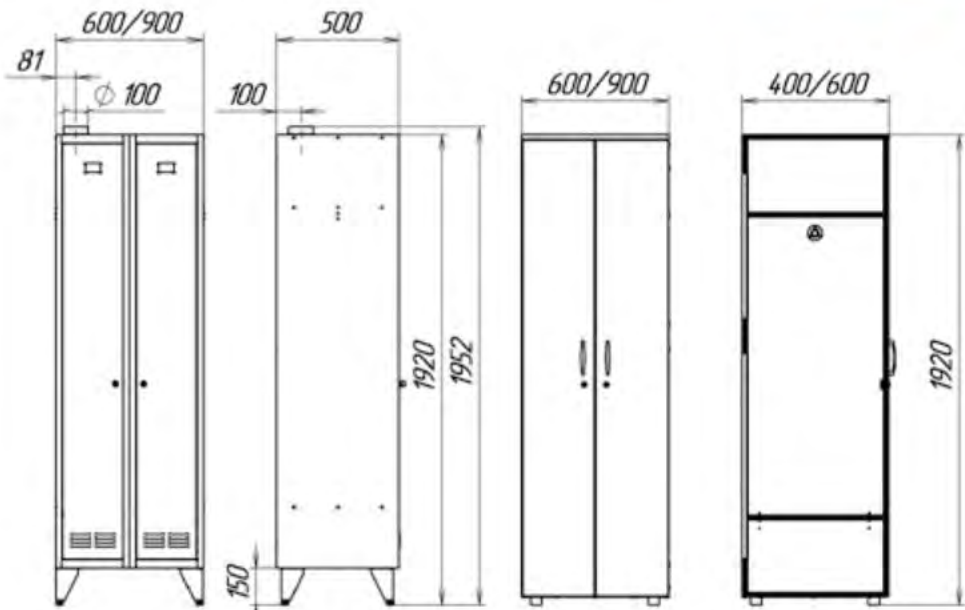

| Korpuso medžiaga  | Matmenys, mm |            |         | Įranga                                                  |
|-------------------|--------------|------------|---------|---------------------------------------------------------|
|                   | Ilgis        | Gylis      | Aukštis |                                                         |
| Lakštinis plienas | 600<br>900   | 500        | 1920 m  | Vamzdis Ø100 mm<br>Sulankstomas suoliukas pasirinktinai |
| Lakštinis plienas | 600<br>900   | 600<br>400 | 1920 m  | G-400 vietoj štangos - drabužių laikiklis               |




SAVYBĖS:

- Pagaminta iš lakštinio metalo arba laminuotos medžio drožlių plokštės
- Vienovė 2 durims ir dviovė 4 durims
- Viršutinės durys gali būti stiklinės
- Reguliuojamos atramos nelygioms grindims kompensuoti
- 400 mm gylis spintelėje papildomai sumontuotas laikiklis tvirtinimui prie sienos

PILNAS RINKINYS:

- Spyna su raktais
- Reguliuojamos lentynos (2 viršutinėje dalyje, 1 apatinėje)

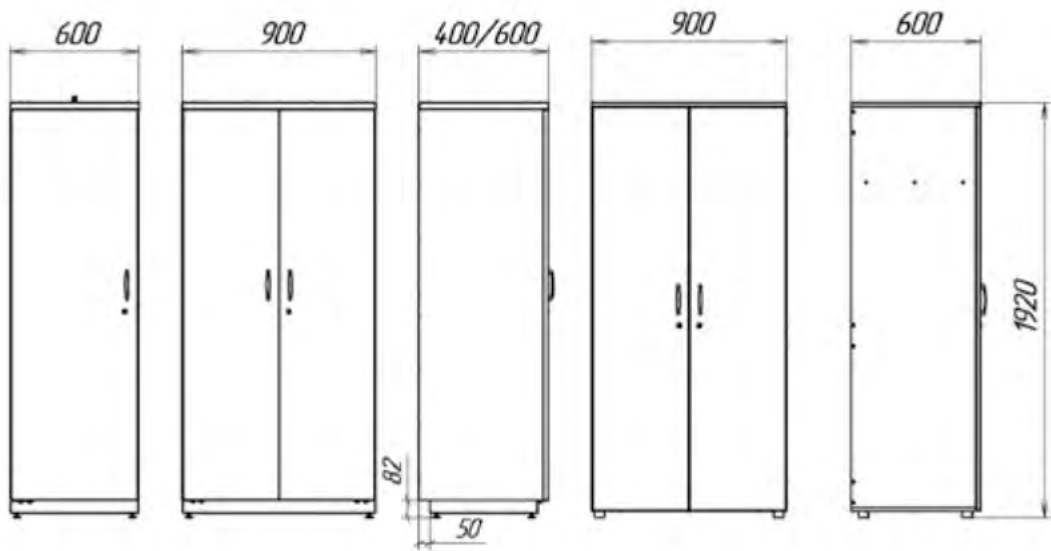

| Korpuso medžiaga                                      | Matmenys, mm         |                      |         | Įranga                               |
|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------|--------------------------------------|
|                                                       | Ilgis                | Gylis                | Aukštis |                                      |
| Lakštinis plienas<br>Laminuota medžio drožlių plokštė | 900<br>600 (metalas) | 600<br>400 (metalas) | 1920 m  | Niša šluostei ir kibirui<br>Užraktas |




SAVYBĖS:

- Spintelės pagrindas – miltelinio būdu dažytas metalinis karkasas
- Du variantai:
  - sandėliavimui patalpose iš metalo
  - sandėliavimui lauke iš cinkuoto plieno
- Reguliuojamos atramos nelygioms grindims kompensuoti

PILNAS RINKINYS:

- Tvirtinimas 40-50 l balionams
- Rampa lengvam montavimui
- Laikiklis 4-12 litrų balionui (išskyrus D-400)

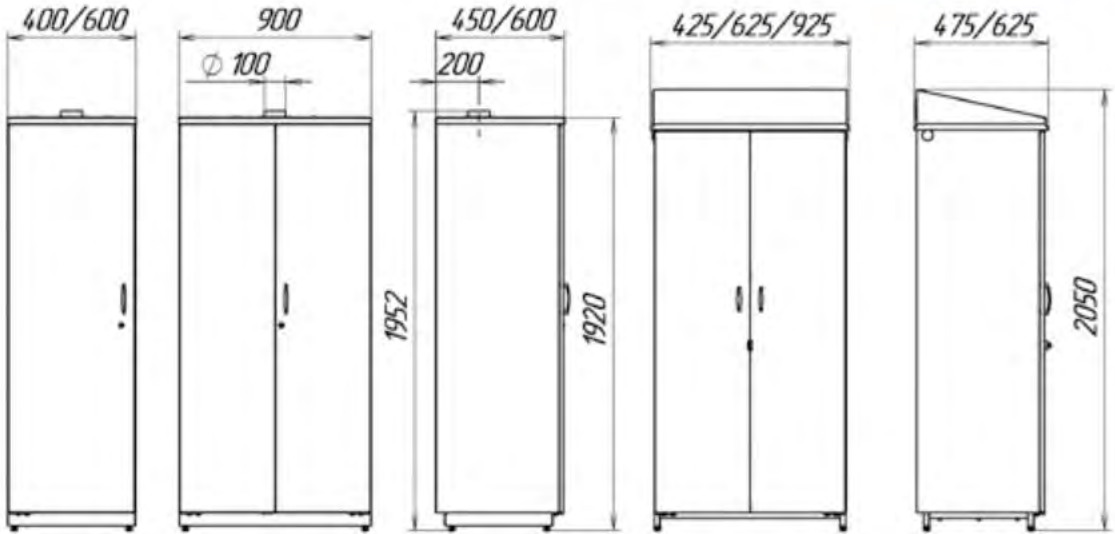

| Korpuso medžiaga  | Matmenys, mm      |                    |         | Įranga                                                             |
|-------------------|-------------------|--------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|
|                   | Ilgis             | Gylis              | Aukštis |                                                                    |
| Lakštinis plienas | 400<br>600<br>900 | 450 (D-400)<br>600 | 1920 m  | Vamzdis Ø100 mm<br>Užraktas                                        |
| Cinkuotas plienas | 425<br>625<br>925 | 475 (D-425)<br>625 | 2050 m  | Rampa su kojomis<br>Nuožulnus dangtis<br>Pakabinamos spynos vyriai |






SAVYBĖS:

- Du lentynų variantai:
  - ant suvirinto rėmo su nuimamomis lentynomis
  - išardomos su reguliuojamo aukščio lentynomis

PILNAS RINKINYS:

- 5-6 lentynos

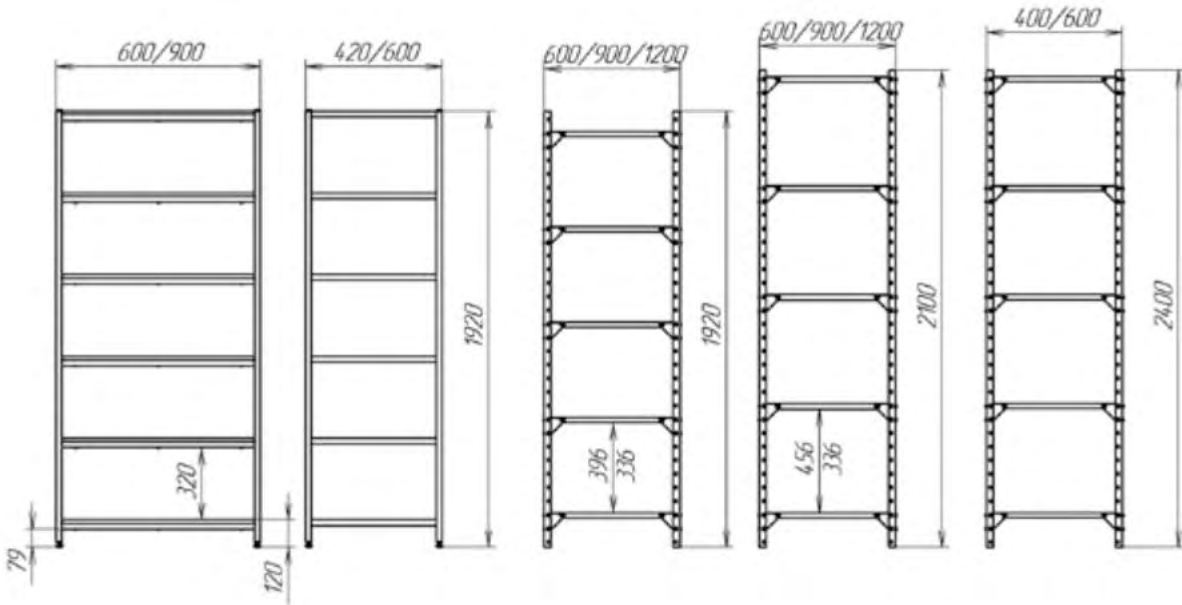

| Gamybos medžiaga           | Matmenys, mm |            |                | Įranga                                                                    |
|----------------------------|--------------|------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                            | Ilgis        | Gylis      | Aukštis        |                                                                           |
| Suvinintas metalinis rėmas | 600<br>900   | 420<br>600 | 1920 m         | 6 lentynos iš medžio drožlių plokštės arba skardos, reguliuojamos atramos |
| Metalas                    | 600          | 400        | 2100           | 4 lentynos                                                                |
| Cinkuotas plienas          | 900<br>1200  | 600        | 1920 m<br>2400 | 5/6 lentynos tvirtinimas varžtais                                         |



Spintos saugojimui



| Pavadinimas      | Reagentams                                  | Rūgštims                                               | Degiams reagentams | Indams                                                                                                 | Balionams        |                 | Drabužiams                             | Lentynos                                |
|------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Modifikacija     | 2 ir 4 durų<br>Stiklinis / metalinis viršus | polipropileno kapsulės /<br>metalas /<br>HPL plastikas | spinta / spintelė  | 2 ir 4 durų<br>stiklinis / metalinis viršus<br>lakštinis plienas /<br>laminuota medžio drožlių plokštė | Patalpoje        | Lauke           | su sulankstomu suoliuku ir be suoliuko | suvinintas rėmas<br>išardomas rėmas     |
| Gamybos medžiaga | lakštinio plieno                            | lakštinio plieno                                       | lakštinio plieno   |                                                                                                        | lakštinio plieno | cinkuoto plieno | lakštinio plieno                       | lakštinio plieno /<br>cinkuotas plienas |
| Užraktas         | 2 vnt                                       | 2 vnt.                                                 | 1 mygtukinis       | 2 vnt                                                                                                  | 1 vnt            | kilpos          | 2 vnt                                  | -                                       |
| Ventiliacija     | Taip                                        | Taip                                                   | Taip               | Ne                                                                                                     | Taip             |                 | Taip                                   | -                                       |
| Ilgis, mm        | 600 / 900                                   | 600                                                    | 600                | 600 / 900                                                                                              | 600 / 900        | 625 / 925       | 1500                                   | 900 1200 / 1500 / 1800                  |
| Gylis, mm        | 600                                         | 600                                                    | 600                | 600                                                                                                    | 600              | 625             | 900                                    | 750                                     |
| Aukštis. mm      | 1920 m                                      | 1920 m                                                 | 1920/706           | 1920 m                                                                                                 | 1920 m           | 2050 m          | 2400                                   | 1920 m                                  |





## STALAI

Stalai



| Pavadinimas  | Tiesioginis                                                      | Tiesus su 2 spintelėmis                     | Kampas                                                                   | Pridedamas         | Pridedamas            | Su spintelė                                 | Stacionari spintelė                         |
|--------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Modifikacija | kairinis / dešininis / be plokščių durys / stalčiai / kombinuoti | dvi spintelės                               | kairinis / dešininis / su dviem plokštėmis durys / stalčiai / kombinuoti | galas / priekis    | stacionarus / mobilus | kairinis / dešininis                        | dvivietė / vienvietė                        |
| Spintelė     | Medienos drožlių plokštės 25 mm / LVT 16 mm                      | Medienos drožlių plokštės 25 mm / LVT 16 mm | Medienos drožlių plokštės 25 mm / LVT 16 mm                              | be plokščių        | be plokščių           | Medienos drožlių plokštės 25 mm / LVT 16 mm | Medienos drožlių plokštės 25 mm / LVT 16 mm |
| Stalviršis   | ant durelių / viršutiniame stalčiuje                             | ant durelių / viršutiniame stalčiuje        | ant durelių / viršutiniame stalčiuje                                     | Ne                 | Ne                    | ant durelių / viršutiniame stalčiuje        | ant durelių / viršutiniame stalčiuje        |
| Užraktas     | Ne                                                               | Ne                                          | Ne                                                                       | Ne                 | Ne                    | Ne                                          | Ne                                          |
| Ilgis, mm    | 1200 / 1500 / 1800 m                                             | 1500/1800                                   | 1500/1800                                                                | 600/1200           | 1100                  | 800                                         | 400/800                                     |
| Gylis, mm    | 600                                                              | 600                                         | 1400                                                                     | 600 / 1200 (D-600) | 600                   | 600                                         | 600                                         |
| Aukštis, mm  | 750                                                              | 750                                         | 750                                                                      | 750                | 750                   | 750                                         | 750                                         |

## SPINTOS IR ANTRESOLĖS

Dokumentų spintos



| Pavadinimas   | Bylų spinta atvira        | Dokumentų spinta uždara                     | Drabužių spinta           | Mezoninas                 | Sieninė spintelė                  | Dokumentų stovas | Kampinė lentyna |
|---------------|---------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------|
| Modifikacija  | 2 durys apačioje          | 4 durys                                     | 2 durys                   | 2 durys                   | 2 durys / atviros                 | atidaryti        | atidaryti       |
| Durų medžiaga | Medienos drožlių plokštės | viršutinis stiklas / medžio drožlių plokštė | Medienos drožlių plokštės | Medienos drožlių plokštės | stiklas / medžio drožlių plokštės | -                | -               |
| Užraktas      | Taip                      | Taip                                        | Taip                      | Ne                        | Ne                                | Ne               | Ne              |
| Ilgis, mm     | 600/800                   | 900                                         | 600                       | 600/800                   | 600/800                           | 600 / 900 / 1200 | 400             |
| Gylis, mm     | 400                       | 600                                         | 400                       | 600                       | 400                               | 360              | 400             |
| Aukštis, mm   | 1920 m                    | 1920 m                                      | 1920 m                    | 630                       | 360                               | 730              | 1920 m          |

## KITI BIURO BALDAI

Biuro baldai



| Pavadinimas | Sofa                                                  | Kavos staliukas                                                | Spintelė buteliams                                                        | Monitoriaus stovas               | Pagrindas blokui                 | Kėdė                        | ISO kėdė                    |
|-------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Medžiaga    | Rėmas - metalinis, sėdima dalis - minkšta, medžiaginė | Rėmas - metalinis, stalviršis - medžio drožlių plokštės, 38 mm | Korpusas - metalinis, stalviršis - LVT, fasadai - medžio drožlių plokštės | Laminuota medžio drožlių plokštė | Laminuota medžio drožlių plokštė | Sėdima dalis - dirbtinė oda | Sėdima dalis - dirbtinė oda |
| Ilgis, mm   | 1620 m                                                | 1000                                                           | 965                                                                       | 450                              | 260                              | 540 (640)                   | 545                         |
| Gylis, mm   | 800                                                   | 550                                                            | 600                                                                       | 450                              | 450                              | 480                         | 600                         |
| Aukštis, mm | 775                                                   | 535                                                            | 980                                                                       | 100                              | 140                              | 1175-1285                   | 810                         |

## LABORATORINĖS KĖDĖS

Laboratorinės kėdės



| Pavadinimas  | Kėdė LK Special  | Kėdė Ergowork Pro | Taburetė Polo          | Taburetė Ekspert        | Kėdė Regal       | Kėdė TF IV LUX   | Kėdė Prestiž     |
|--------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Sėdima dalis | poliuretan       | poliuretan        | pilnavertis poliuretan | aukšto slėgio laminatas | dirbtinė oda     | dirbtinė oda     | dirbtinė oda     |
| Spalva       | juoda            | pilka             | juoda, mėlyna, žalia   | pilka                   | juoda            | balta            | juoda            |
| Atrama       | ratukai / volai  | ratukai / volai   | ratukai / volai        | kojos                   | vyriai           | ratukai          | ratukai          |
| Reguliavimas | dujinis keltuvas | dujinis keltuvas  | dujinis keltuvas       | be reguliavimo          | dujinis keltuvas | dujinis keltuvas | dujinis keltuvas |
| Korpusas     | juodas           | chromuotas        | juodas                 | metalinis, pilkas       | juodas           | chromuotas       | juodas           |





Laboratorinių, medicininių ir edukacinių baldų gamyba



- ✓ Daugiau nei 20 metų patirtis
- ✓ Specializuota viso ciklo gamyba
  - ✓ ISO 9001, 13485, 14001
  - ✓ 18 mėnesių garantija
  - ✓ Pasas kiekvienam produktui
- ✓ Susijusios paslaugos ir palaikymas
  - ✓ Kompleksiniai sprendimai



[labexpert.com.ua](http://labexpert.com.ua)



+38 044 364 42 42



Brovarų miesto biuras , g. Sichovh Streletsiv, 8



[sale@labexpert.com.ua](mailto:sale@labexpert.com.ua)